


print info

Print area: 400*140mm
Fold size: 100*140 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

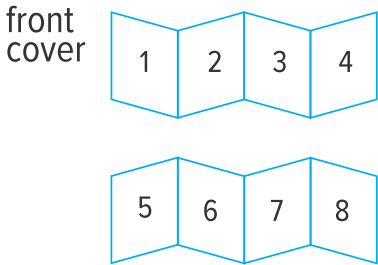

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ


ID: SD-MSE3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование значительно продлит срок его службы.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Ремешок
- 2. Застежка для регулировки длины ремня для головы
- 3. Массажные подушки
- 4. Кнопка питания (Вкл./Выкл.)/Регулировка режимов
- Долгое нажатие – включение/выключение устройства
- Короткое нажатие – переключение режимов
- Короткое двойное нажатие – включение/выключение нагрева
- Короткое тройное нажатие – воспроизведение/пауза
- LED – дисплей
- Индикатор инфракрасного нагрева
- Индикатор режима массажа
- Индикатор воспроизведения музыки
- Индикатор заряда батареи
- Индикатор мигает – низкий уровень заряда
- Индикатор мерцает – производится зарядка

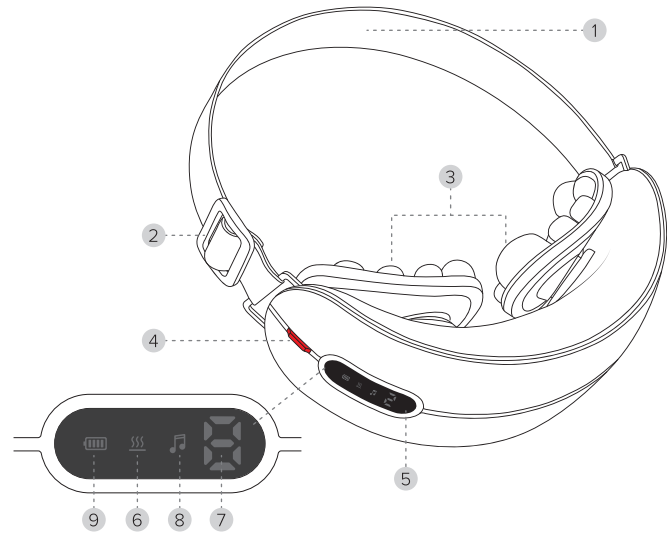

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 5 Вт
Питание: от встроенного аккумулятора
Вход: Type-C 5В/1А
Емкость встроенного аккумулятора: 1200 мАч / 3.7В
Количество режимов: 4
Материал: пластик, полиэстер
Комплектация: устройство, документация, USB-кабель

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Включение устройства

Нажмите и держите кнопку питания (4). Загоревшийся LED-дисплей подтвердит включение.

Выключение

Нажмите и держите кнопку питания (4). Погаснувший LED-дисплей подтвердит выключение.

Управление режимами работы

Устройство обладает четырьмя различными режимами работы:

Режим	Массаж сильной интенсивности (направление 1)	Массаж слабой интенсивности (направление 1)	Массаж сильной интенсивности (направление 2)	Массаж слабой интенсивности (направление 2)	Прогрев	Прогревание музыки	Таймер (минут)
Режим 1		+			+	+	10
Режим 2	+					+	10
Режим 3			+		+		10
Режим 1				+			10

Для последовательного переключения режимов работы коротко нажимайте на кнопку питания/переключения режимов (4).

Сопряжение с внешним устройством по bluetooth

Убедитесь, что устройство включено и откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет массажер, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «000», или другие для создания пары.

После создания пары между вашим устройством и массажером можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
 - Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 - Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите USB кабель к Type-C разъему. Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет издавать пульсирующий свет. Когда LED индикатор будет издавать непрерывный свет – зарядка окончена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство на сухой коже. Перед использованием протрите места контакта на коже влажным полотенцем.
- Устройство разработано для массажа в области глаз. Не пытайтесь использовать устройство для массажа других частей тела.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
- Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
- Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование
- Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застои крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожаная болезнь.
 - у вас плохое физическое состояние;
 - вы перенесли операции на глазах;
 - если вы страдаете от глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки или других глазных заболеваний.
- Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.
- Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом
- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
- Обязательно выключайте устройство после использования.
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: массажер для глаз. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для массажа в области глаз посредством электрических импульсов и нагрева. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: SecretDate. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.



Изделие

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент