

**Делаю массаж –
высший пилотаж!**



**Массажер для шеи и плеч
КТ-2905**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|---|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство массажера для шеи и плеч | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 5 |
| Чистка и обслуживание | 7 |
| Уход и хранение | 7 |
| Устранение неполадок | 7 |
| Технические характеристики | 8 |
| Меры предосторожности | 9 |

Общие сведения

Массажер для шеи и плеч Kitfort КТ-2905 поможет избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или тем, у кого сидячий образ жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, электромассажер устраняет стресс и затекание мышц. Также устройство можно использовать для массажа поясницы, живота, бедер и стоп. Три скорости разминающего массажа, а также выбор направления вращения роликов обеспечат максимальный комфорт. У электромассажера есть функция инфракрасного прогрева, а также таймер с автоматическим отключением после 15-минутного сеанса. Функция инфракрасного прогрева улучшает кровообращение и лимфоотток, тем самым повышая эффективность массажа. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлиненных ручек. Электромассажером можно пользоваться в автомобиле, подключив его к адаптеру в прикуривателе.

Комплектация

1. Электромассажер — 1 шт.
2. Провод питания массажера — 1 шт.
3. Сетевой адаптер — 1 шт.
4. Автомобильный адаптер (в прикуриватель) — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи и плеч



Нажатием на кнопку «Инфракрасный прогрев» включайте или выключайте данную функцию. Инфракрасный прогрев работает совместно с массажем.

Нажатием на кнопку «Скорость вращения роликов» меняйте их скорость вращения на высокую, среднюю или низкую.

При каждом нажатии на кнопку «Направление вращения роликов», массажные ролики будут вращаться в разные стороны относительно друг друга.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте массажер и протрите его влажной тканью.

Подключите сетевой адаптер с проводом питания массажера и подключите сетевой адаптер к источнику питания.

Поместите массажер на шею (воротниковую зону) так, чтобы пульт управления оказался с левой стороны, и вдените руки в удлиненные ручки.



Использование

Нажмите на кнопку Вкл/Выкл и устройство начнет работу.

Выберите комфортную для вас скорость вращения роликов и направление их движения.

Включите прогрев нажатием на кнопку «Инфракрасный прогрев» по необходимости.


Один сеанс массажа длится 15 минут, далее сработает автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку включения.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению, такие как:
 - инфекционные заболевания кожи;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, при заболевании сердца, например кардиостимулятора;
 - повышенная температура;
 - сахарный диабет.
4. Пользоваться с осторожностью при:
 - беременности;
 - наличии ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительности к теплу;
 - переутомлении.

Советы

1. Помимо массажа шейно-плечевого отдела, используйте прибор для массажа поясницы, живота, бедер или стоп.

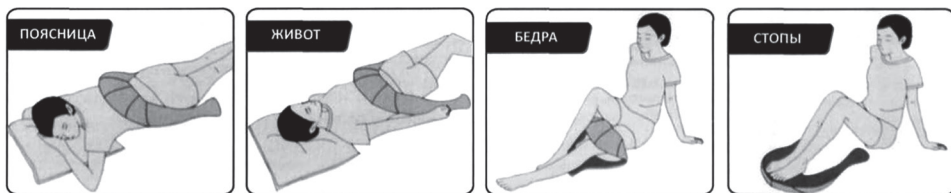

2. Пользуйтесь массажером в личном автомобиле, подключив массажер к прикуривателю через автомобильный адаптер (входит в комплект).

Внимание!

Не используйте массажер во время езды во избежание аварийных ситуаций на дороге. Если в дороге вы устали, припаркуйтесь и тогда используйте массажер.

3. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача.
4. Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться синяки и начаться боль в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Каждый сеанс длится 15 минут, далее у массажера срабатывает автоотключение.

Чистка и обслуживание

Чистите корпус ворсовой щеткой или щеткой с микрофиброй. Не используйте агрессивные моющие средства.

Для чистки роликов используете сухую мягкую ткань. Растегните молнию на кожухе массажера и протрите ткань образовавшуюся под кожухом пыль. Будьте осторожны, не повредите механизмы устройства при обслуживании.

Уход и хранение

В случае если массажер не используется в течение долгого времени, очистите его от пыли и других загрязнений, и поместите на хранение в сухое место.

Устранение неполадок

Электромассажер не работает

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Вилка не вставлена в розетку | Вставьте вилку в розетку |
| Электромассажер не включен | Нажмите на кнопку Вкл/Выкл |
| Закончился 15 минутный сеанс массажа и прибор автоматически выключился | Сработало автоотключение. Если хотите начать новый сеанс, то во избежание перегрева устройства подождите 10–15 минут и нажмите на кнопку включения |

Электромассажер нагрелся

| Возможная причина | Решение |
|-------------------------------------|---|
| Вы провели несколько сеансов подряд | Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть 30 минут |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - Вход: $\sim 100\text{--}240\text{ В}$, 50/60 Гц
 - Выход: $\text{---}12\text{ В}$, 2 А
- Напряжение: $\text{---}12\text{ В}$, 2 А
- Мощность: 24 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - Блока питания: II
 - Электромассажера и автомобильного адаптера: III
- Размер устройства: 1450 × 190 мм
- Размер упаковки: 400 × 180 × 190 мм
- Вес нетто: 1,6 кг
- Вес брутто: 2,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сямин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа массажера или его несоответствующего использования.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей в массажер или шнур питания не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицирован-

ному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-2



Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти все необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru