


**С заботой
о твоём
теле!**

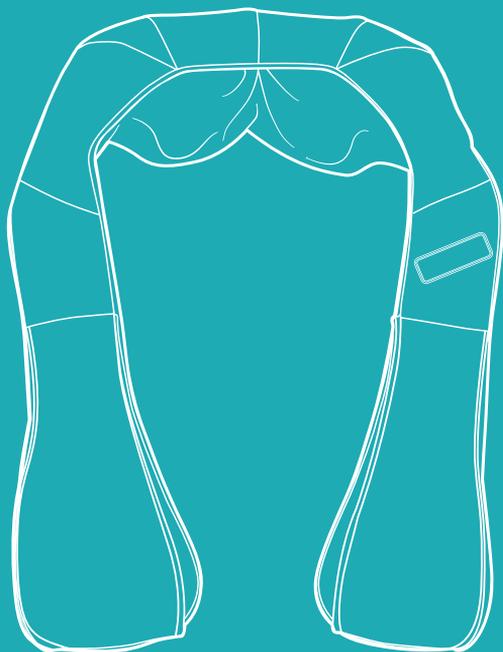

**Массажер для шеи
КТ-5958**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

| | |
|---|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 4 |
| Устройство массажера для шеи | 5 |
| Подготовка к работе и использование | 6 |
| Чистка и обслуживание | 8 |
| Уход и хранение | 8 |
| Устранение неполадок | 8 |
| Технические характеристики | 9 |
| Меры предосторожности | 10 |

Общие сведения

Массажер для шеи КТ-5958 выполняет массаж шеи массажными роликами, воздействуя на мышцы шейно-воротниковой зоны. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови. Благодаря инфракрасному нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи.

Также массажер КТ-5958 можно использовать для массажа других зон: поясницы, живота, бедер и стоп.

Управлять массажером очень просто. Массажер включается на третьей скорости вращения роликов с нагревом. Вы можете включить или отключить автоматическую смену направления вращения массажных роликов и инфракрасный нагрев, а также выбрать одну из трех скоростей вращения роликов. Благодаря наличию трех скоростей вращения роликов, возможности включить или отключить нагрев и автоматическую смену направления вращения роликов вы подберете массаж, который подходит вам лучше всего.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 15 минут. Через 15 минут массажер автоматически отключается. Не используйте массажер на одной зоне более одного раза подряд и более двух раз в день.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-5958 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо поврежденных кожи, например, ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи

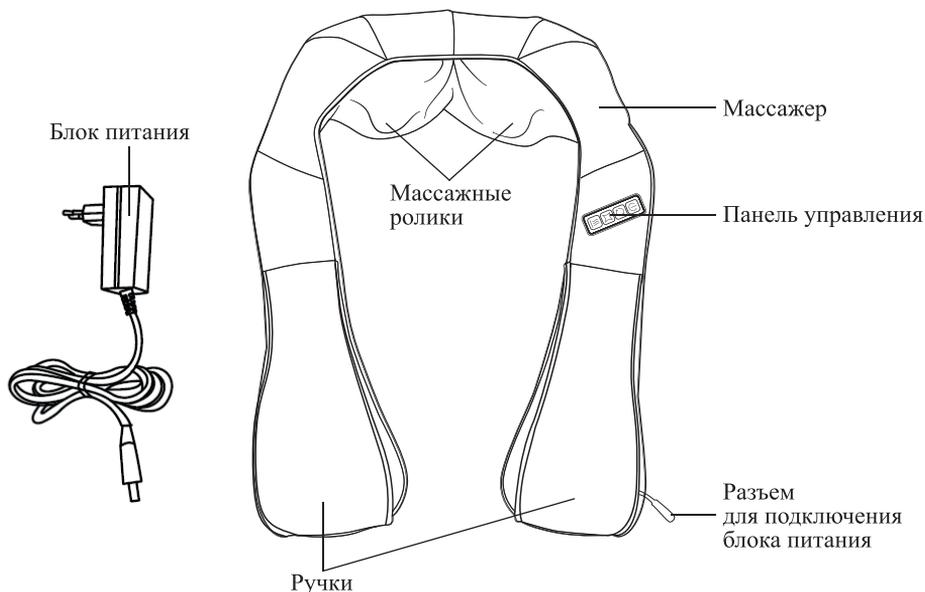

Панель управления

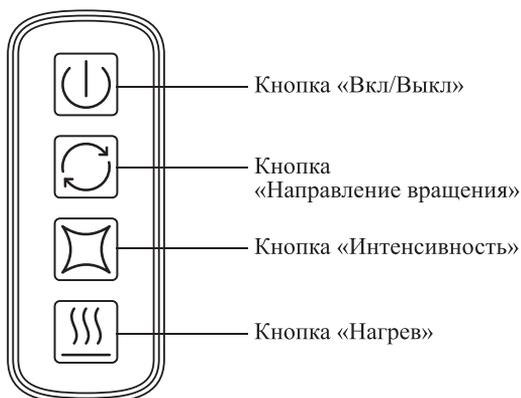

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер. Массажер включается на высокой скорости вращения роликов, с нагревом и автоматической сменой направления вращения роликов каждую минуту. Через 15 минут массажер автоматически отключается.

Кнопка «Направление вращения» отключает автоматическую смену направления вращения роликов и переключает направление вращения роликов.

Кнопка «Интенсивность» циклически переключает 3 скорости вращения роликов (низкую, среднюю и высокую). Чем быстрее вращаются ролики, тем выше интенсивность массажа.

Кнопка «Нагрев» включает и отключает нагрев.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер мягкой тканью.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению».
2. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Подключите блок питания к разъему массажера, а затем к сети.
4. Наденьте массажер на шейно-воротниковую зону. Примите удобное положение, шея не должна быть напряжена. Руки просуньте в петли ручек массажера.

Примечание. Вы можете использовать массажер для выполнения массажа передней и задней поверхности бедра, поясницы, стоп, живота.



5. Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Массажер включится: ролики будут вращаться с высокой скоростью, инфракрасный нагрев будет включен, направление вращения будет меняться каждую минуту.

6. Если вы хотите отключить автоматическую смену направления вращения и сменить направление, нажмите на кнопку «Направление вращения». Вы можете вручную переключать направление вращения, автоматически направление вращения меняться не будет.
7. Чтобы отключить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев». Чтобы снова включить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев» еще раз.
8. Чтобы изменить скорость вращения роликов, нажимайте на кнопку «Интенсивность».
9. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. По истечении 15 минут массажер автоматически отключается. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
10. Отключите блок питания от сети и массажера. Протрите массажер мягкой тканью.

Примечание. При возникновении неприятных ощущений, прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны. Если вы хотите использовать массажер повторно для другой зоны, подождите 15–30 минут, чтобы массажер не перегревался.

Меры предосторожности по применению

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Существует ряд противопоказаний к применению:

- беременность;
- варикозное расширение вен, тромбофлебит;
- наличие имплантов, пластин;
- нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
- нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
- наличие кожных заболеваний;
- обострение хронических заболеваний;
- онкология;
- травмы, переломы;
- остеопороз;
- наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
- недавняя операция или ввод инъекций;
- гипертония;
- грипп, ОРВИ, повышение температуры;
- почечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- гипогликемия;
- слабость, нервозность;
- переутомление.



Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем 15 минут. Не рекомендуется использовать массажер на одной зоне дольше 15 минут.

Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуется устанавливать высокую интенсивность массажа. В противном случае во время массажа вы можете испытывать неприятные ощущения или на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань или губку, смоченные в мыльном растворе. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкости внутрь массажера, на кнопку «Вкл/Выкл», шнур и разъем для шнура.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой

Устранение неполадок

Устройство не включается, ролики не вращаются

| Возможная причина | Решение |
|---|---|
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Блок питания не подключен к массажеру или сети | Подключите блок питания к разъему массажера, а затем к сети |
| Устройство подключено к сети, но вы не включили его | Чтобы включить массажер, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» |

Ролики меняют направление вращения каждую минуту

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| При включении массажера включена автоматическая смена направления вращения роликов каждую минуту | Это не является неисправностью. Чтобы отключить смену вращения роликов, нажмите на кнопку «Направление вращения». Чтобы снова включить автоматическую смену направления вращения роликов, необходимо выключить и включить массажер |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,8 А
 - выход: =12 В, 2 А
2. Мощность: 24 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера: III
4. Автоотключение: через 15 минут
5. Тип массажера: роликовый
6. Длина шнура: 1,8 м
7. Размер устройства: 450 × 165 × 560 мм
8. Размер упаковки: 400 × 180 × 180 мм
9. Вес нетто: 1,1 кг
10. Вес брутто: 1,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сямэнь Хэлспал Электроник Ко., Лтд. Юнит 1402, Блок Б, Тяньху Билдинг, №148, Биньлан Сили, Сымин Дистрикт, Сямэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.



Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера для шеи вследствие попадания жидкостей, порошков или посторонних предметов внутрь массажера, на разъем для блока питания, блок питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если блок питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для блока питания, на блок питания и органы управления.
15. При повреждении блока или шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1




Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радуется подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

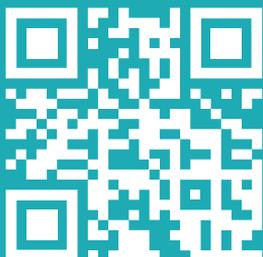

Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru