

Секрет здоровой улыбки!



Ирригатор
для полости рта
КТ-5943

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство ирригатора для полости рта	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности	15
Мобильное приложение Kitfort	18

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**


Жалпы мәліметтер	20
Жинақтау	21
Ауыз қуысына арналған ирригатор құрылғысы	22
Жұмысқа дайындық және пайдалану	24
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	27
Күтім және сақтау	28
Ақаулықтарды жою	28
Техникалық сипаттамалары	30
Сақтық шаралары	31
Kitfort қосымшасы	34

Общие сведения

Ирригатор КТ-5943 — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для ирригаторов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начинайте очистку.

После еды остатки пищи застревают между зубами, забиваются в карманы десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флоссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Также зубной нитью можно механически повредить десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флоссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и налет из межзубного пространства и десневых карманов. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболевания десен. Ирригатор считается самым гигиеничным вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен для тех людей, которые носят брекеты, и людям с протезами или коронками.

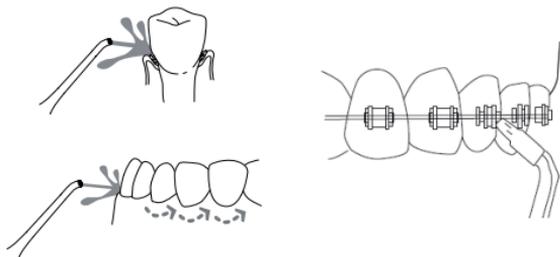

Модель КТ-5943 является портативным ирригатором, его можно брать с собой в путешествия или на работу.

Прибор работает в четырех автоматических режимах: «Мягко», «Норма», «Сильно» и «Пульс». Также есть ручной режим, в котором можно настроить 10 уровней силы струи. Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с режима «Мягко» или с первого уровня силы струи в ручном режиме, так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и тонкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете выбрать режим с большей силой струи.

Прибор автоматически отключается после 3 минут использования.

У ирригатора есть резервуар для воды емкостью 350 мл, которого хватает для тщательной обработки полости рта. В комплекте к ирригатору идут две классических струйных насадки.

RUS

Ирригатор для полости рта
КТ-5943


В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменяет собой зубную щетку, он является частью комплексного ухода за полостью рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш лечащий врач-стоматолог, обычно уход включает в себя ирригацию, чистку зубов зубной щеткой и ершиками, полоскание рта ополаскивателем и использование зубной нити, если это необходимо. Ирригатор рекомендуют стоматологи во всем мире.

Комплектация

1. Ирригатор с заглушкой разъема для зарядки и всасывающей трубкой с фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для воды с уплотнительным кольцом крышки резервуара — 1 шт.
3. Струйная насадка — 2 шт.
4. Шнур USB Type-C — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ирригатора для полости рта

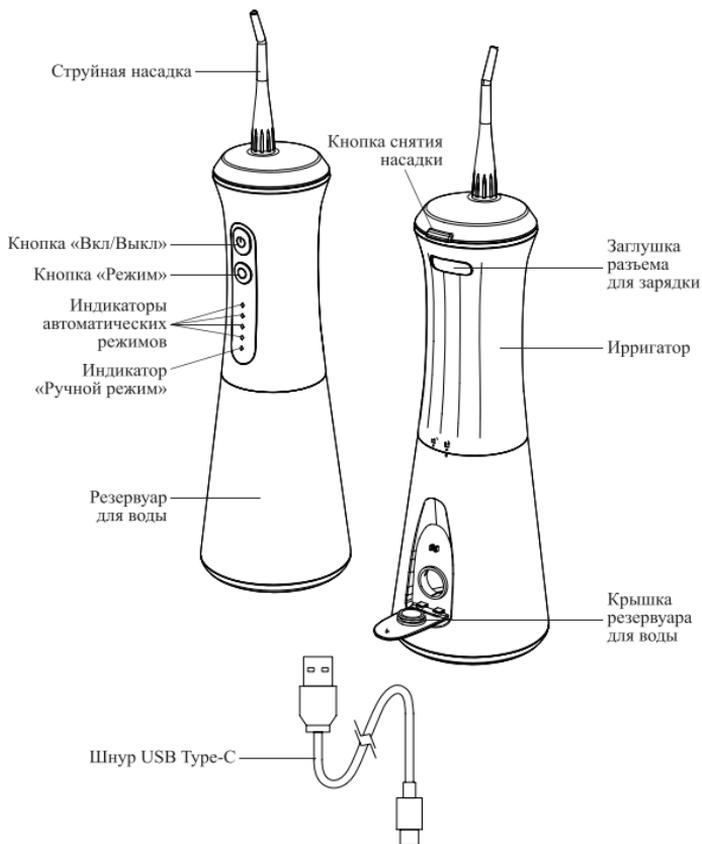

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает работу ирригатора.

Короткое нажатие на **кнопку «Режим»** циклически переключает четыре автоматических режима работы устройства. При этом загорается соответствующий **индикатор автоматического режима**. Названия режимов подписаны рядом с индикаторами.

RUS

Ирригатор для полости рта
КТ-5943

Нажатие с удержанием на кнопку «Режим» включает и выключает ручной режим работы ирригатора, при этом загорается **индикатор «Ручной режим»**. Когда ручной режим включен, нажатие на кнопку «Режим» циклически переключает 10 уровней силы струи. При смене уровня силы струи индикатор «Ручной режим» мигает.

Если аккумулятор разряжен, индикатор «Ручной режим» будет мигать красным. Индикатор «Ручной режим» горит красным, когда ирригатор заряжается, и горит зеленым, когда он полностью заряжен.

Режимы работы

В **режиме «Норма»** точно направленная струя воды очищает межзубное пространство и другие труднодоступные места во рту.

В **режиме «Мягко»** сила струи меньше, чем в режиме «Норма». Если вы до этого не пользовались ирригатором, или у вас чувствительные десны, то рекомендуется начинать пользоваться ирригатором, установив этот режим. Неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды.

В **режиме «Сильно»** сила струи больше, чем в режиме «Норма».

Режим «Пульс» предназначен для массажа десен и общей чистки полости рта пульсирующей струей воды. Массаж десен усиливает микроциркуляцию крови, что является хорошей профилактикой пародонтита и пародонтоза.

Ручной режим позволяет настроить силу струи вручную и подобрать наиболее подходящую для ваших десен.

Классическая струйная насадка

С помощью данной насадки можно очистить труднодоступные места во рту. Остатки пищи, которые глубоко «забиваются» в зубных или междесневых пространствах, с легкостью вымываются потоком воды или специального раствора.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Затем вымойте резервуар для воды и насадки, налейте воду в резервуар, установите струйную насадку сверху ирригатора до упора и включите прибор с водой, направляя насадку в раковину.

Перед первым использованием зарядите ирригатор.

Зарядка ирригатора

Если аккумулятор разряжен, индикатор «Ручной режим» будет мигать красным.

Перед подключением шнура USB Type-C к разъему для зарядки на ирригаторе убедитесь, что ирригатор и заглушка сухие. Откройте заглушку разъема для зарядки, подключите шнур USB Type-C к разъему устройства, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор «Ручной режим» горит красным. Когда устройство полностью зарядится, индикатор «Ручной режим» будет гореть зеленым. Время зарядки аккумулятора составляет примерно 4–6 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки ирригатор не включать.

По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства и закройте разъем для зарядки заглушкой.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Установка насадки

Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи.

Вставьте насадку сверху ирригатора до упора.


Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх.



Примечание. Установка и снятие насадки в новом ирригаторе могут быть затруднительными.

Как налить воду в резервуар

Откройте крышку резервуара, наклоните корпус горизонтально. Налейте воду или специальный раствор для ирригаторов в резервуар.

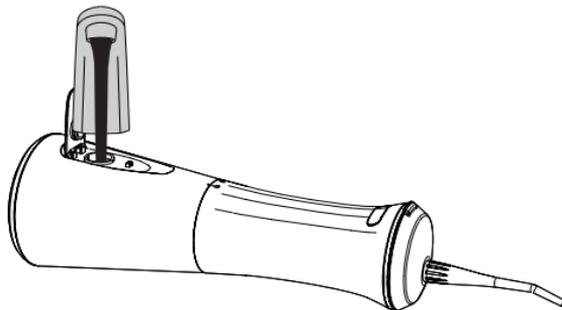

Также вы можете снять резервуар для воды и наполнить его в вертикальном положении. Для этого удерживайте ирригатор одной рукой, другой рукой поверните резервуар в сторону значка открытого замка и потяните в сторону от устройства. Затем наполните резервуар водой или специальным раствором. Установите ирригатор на резервуар и поверните для фиксации.

Используйте кипяченую воду или специальный раствор для ирригаторов. Температура воды или раствора должна быть близкой к температуре тела человека (35–40 °С). Горячая вода не повышает качество чистки и может навредить вам, а слишком холодная вода вызывает неприятные ощущения.

Использование

1. Заполните резервуар водой или специальным раствором для ирригаторов, как описано в разделе «Как налить воду в резервуар».
2. Установите насадку сверху ирригатора до упора.
3. Кнопкой «Режим» выберите подходящий режим работы, индикатор соответствующего режима будет гореть. Также вы можете установить ручной режим работы, нажав и удерживая кнопку «Режим» несколько секунд, индикатор «Ручной режим» будет гореть.


Примечания. Если после выбора режима вы не нажали на кнопку «Вкл/Выкл» в течение 8 секунд, прибор автоматически выключится.

Вы также можете сначала включить ирригатор кнопкой «Вкл/Выкл», а затем выбрать режим работы.

4. Перед тем, как включить ирригатор, наклоните его под углом 45° и поместите насадку в рот.

- Наклонитесь над раковиной, слегка приоткройте рот. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить ирригатор. Прибор начнет работу. Если вы устанавливали ручной режим работы, настройте силу струи, нажимая на кнопку «Режим». Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке: двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте ирригатор только при нахождении насадки во рту.

Примечание. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко» или первый уровень силы струи в ручном режиме, иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмированы резким и сильным потоком воды.

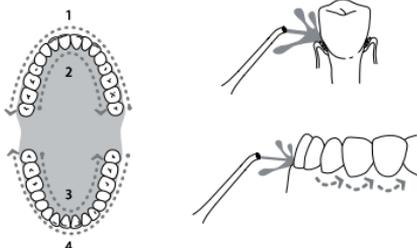

Примечание. У ирригатора есть функция памяти. В следующий раз при нажатии на кнопку «Режим» загорится индикатор того режима, который был установлен при прошлом использовании, а при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» ирригатор включится в том режиме, который был установлен при прошлом использовании.

- Рекомендуемое время чистки ротовой полости при помощи ирригатора составляет 2 минуты. По истечении 3 минут ирригатор автоматически отключается. Если вода закончилась или вы хотите прекратить чистку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
- Снимите насадку, нажав на кнопку снятия насадки. Отсоедините резервуар для воды. Вымойте насадку и резервуар для воды.

Примечания. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для ирригаторов, обязательно промойте ирригатор после него, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Резервуар и насадку рекомендуется промывать и просушивать после каждого использования. Если этого не делать и ирригатором не пользоваться несколько дней, внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды. Чтобы

резервуар для воды мог просохнуть, если ирригатор стоит в собранном виде, откройте крышку резервуара для воды на несколько часов.

Советы

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко» или первый уровень силы струи в ручном режиме, иначе чувствительные десны могут быть травмированы резким потоком воды. Со временем десны привыкнут к новым ощущениям, можно будет выбрать режим с большей силой струи.

У ирригатора есть функция памяти. В следующий раз при нажатии на кнопку «Режим» загорится индикатор того режима, который был установлен при прошлом использовании, а при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» ирригатор включится в том режиме, который был установлен при прошлом использовании.

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, проконсультируйтесь с врачом.

Рекомендуется открывать крышку резервуара для воды или снимать резервуар после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарялись. Если крышку не открывать и ирригатором не пользоваться несколько дней, внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды.

Рекомендуемая температура воды или раствора должна быть не выше 40 °С, ориентируйтесь на свои ощущения, со временем вы поймете, воду какой температуры использовать комфортнее всего.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания выключите прибор и убедитесь, что заглушка разъема для зарядки плотно закрыта. Протирайте ирригатор влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Периодически промывайте насадки водой с мылом. Меняйте насадки по мере износа.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его перед новым включением. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя насадку в раковину.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать, промывайте устройство сразу же после использования таких растворов. Для этого налейте в резервуар чистую воду и включите ирригатор с установленной насадкой, направляя насадку в раковину.

Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на органы управления и шнур USB Type-C.

Очистка от известкового налета

Внутри ирригатора по истечении некоторого времени начинают скапливаться известковый налет и прочие отложения. Это зависит от жесткости воды. Налет накапливается как в резервуаре для воды, так и на внутренних поверхностях. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благотворной средой для размножения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет со всех поверхностей и скрытых элементов устройства. Действуйте согласно инструкции к такому средству.

Вы также можете воспользоваться лимонной кислотой из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте 350 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар ирригатора. Включите ненадолго ирригатор, после этого оставьте на 15–20 минут. Затем включите ирригатор с чистой водой несколько раз.

Уход и хранение

Храните ирригатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, вымойте и просушите его и насадки, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Насадки можно хранить в резервуаре для воды, чтобы они не потерялись. На длительное хранение уберите ирригатор, насадки и шнур USB Type-C в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. Если ирригатор не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите ирригатор, затем заряжайте его примерно 2–3 часа.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите ирригатор в соответствии с разделом «Зарядка ирригатора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Ирригатор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк или ноутбук разряжен или не включен	Зарядите и включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный

Вода вытекает из места соединения насадки с корпусом

Возможная причина	Решение
Насадка установлена неплотно	Установите насадку до упора

Из резервуара вытекает вода

Возможная причина	Решение
Крышка резервуара для воды не закрыта или пропускает воду	Закройте крышку резервуара для воды или замените уплотнительное кольцо, установленное на крышку резервуара для воды
Резервуар неправильно установлен	Установите резервуар правильно, как описано в разделе «Как налить воду в резервуар»

Вода не поступает

Возможная причина	Решение
Насадка засорилась	Хорошо промойте насадку, вставьте ее в прибор и встряхните резервуар перед использованием
Налет накопился на внутренних поверхностях прибора	Произведите очистку ирригатора так, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Насадка не снимается

Возможная причина	Решение
Вы не нажали на кнопку снятия насадки	Нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C –5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,8 А*ч (6,66 Вт*ч)
5. Частота пульсации струи: 1100–1500 имп/мин
6. Давление воды: 2,76–7,59 бар
7. Емкость резервуара для воды: 350 мл
8. Время зарядки: 4–6 ч
9. Режимов работы: 5
10. Автоотключение: через 3 мин
11. Время работы ирригатора:
 - в режиме «Мягко»: 80 мин
 - в режиме «Норма»: 70 мин
 - в режиме «Сильно»: 55 мин
 - в режиме «Пульс»: 65 мин
 - в ручном режиме: 60–80 мин
12. Длина шнура USB Type-C: 0,7 м
13. Размер устройства: 82 × 82 × 315 мм
14. Размер упаковки: 100 × 100 × 263 мм
15. Вес нетто: 0,31 кг
16. Вес брутто: 0,49 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Ханчжоу Викэнтайгер Атомобил Продактс Ко., Лтд. 6Ф Билдинг А, Пауэрлонг Сити Плаза, №3867 Биньшэн Роуд, Ханчжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

RUS

Ирригатор для полости рта
КТ-5943

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления, на шнур USB Type-C и в разъем для зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Людям, которые недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением ирригатора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу.
3. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

4. Используйте ирригатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
7. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования, промывайте и просушивайте резервуар для воды и насадку.
13. Температура воды или раствора должна быть не выше 40 °C.
14. Не допускайте падения ирригатора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.

19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на органы управления и шнур USB Type-C.
20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
22. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства. После зарядки всегда закрывайте разъем для зарядки заглушкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store




Google Play

Скачивайте приложение Kitfort



**Салауатты
күлімсіреудің
құпиясы!**

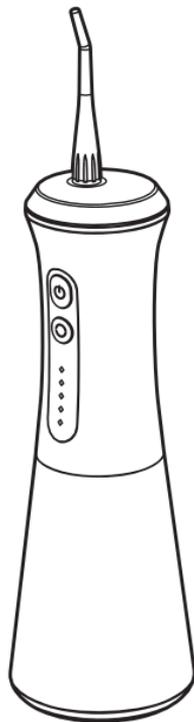

**КТ-5943
ауыз қуысына
арналған ирригаторы**


KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-5943 ирригаторы — ауыз қуысын күтуге арналған құрал. Оны пайдалану өте оңай: резервуарға су құйыңыз (немесе арнайы суару ерітіндісі), өзіңізге сәйкес режимді таңдап, тазалауды бастаңыз.

Тамақтанғаннан кейін тамақ қалдықтары тістердің арасына жабысып, қызыл иектің қалтасына бітеліп қалады. Мұндай жағдайларда тіс жібі немесе флоссер көмекке келуі мүмкін. Бірақ тістерді жіппен тазалау үшін қолдың тазалығын қамтамасыз ету керек, оларды жуу мүмкіндігі әрдайым бола бермейді. Әйтпесе, патогендік бактериялар мен вирустардың ауыз қуысына ену ықтималдығы артады. Сондай-ақ, тіс жіптері сіздің қызыл иегіңізді механикалық зақымдауы мүмкін.

Ирригатор жіпті немесе флоссерді ішінара алмастыра алады. Жіңішке және күшті су ағыны тамақ қалдықтары мен бляшкаларды тіс аралық кеңістіктен және қызыл иек қалталарынан тазартады. Су ағыны қол жетпейтін жерлерді тазартып қана қоймайды, сонымен қатар қызыл иекті мұқият уқалайды, бұл қызыл иек ауруының алдын алады. Суарғыш ауыз қуысын күтудің ең гигиеналық нұсқасы болып саналады. Бұл әсіресе жақша киетін адамдарға және протездері немесе тәждері бар адамдарға пайдалы болады.

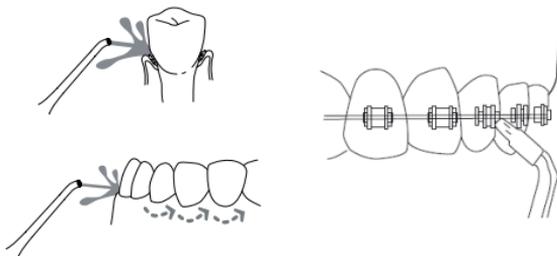

КТ-5943 моделі портативті ирригатор болып табылады және оны саяхатқа немесе жұмысқа апаруға болады.

Құрылғы төрт автоматты режимде жұмыс істейді: «Жұмсақ», «Қалыпты», «Күшті» және «Импульс». Сондай-ақ, ағынғы күштің 10 деңгейін реттеуге болатын қолмен жұмыс режимі бар. Егер сіз бұған дейін суарғышты пайдаланбаған болсаңыз, «Жұмсақ» режимнен немесе қолмен режимдегі реактивті күштің бірінші деңгейінен бастаңыз, өйткені дайын емес және сезімтал қызыл иектер судың күшті және жұқа ағынына байланысты қан кете бастайды. Сағыз үйреніп, күшейген кезде, сіз көбірек ағынғы режимді таңдай аласыз.

Құрылғы 3 минут қолданғаннан кейін автоматты түрде өшеді.

Ирригаторда ауыз қуысын мұқият өңдеуге жеткілікті 350 мл су ыдысы бар. Екі классикалық реактивті саптама ирригаторға жинақталған.


Профилактикалық мақсатта әр ересек адамға суарғыш қажет. Ирригатор тіс щеткасын алмастырмайды, ол ауыз қуысының кешенді күтімінің бөлігі болып табылады. Сіз үшін кешенді күтімді сіздің алғашқы медициналық көмек дәрігеріңіз таңдауы керек, әдетте күтім суару, тіс щеткасымен және щеткамен тазалау, ауызды шаю және қажет болған жағдайда жіппен тазалауды қамтиды. Ирригаторды бүкіл әлемдегі стоматологтар ұсынады.

Жинақтау

1. Зарядтау коннекторының ашасы және сүзгісі бар сорғыш түтігі бар ирригатор — 1 дана
2. Резервуар қақпағының тығыздағыш сақинасы бар су ыдысы — 1 дана
3. Сиялы саптама — 2 дана
4. USB Type-C сымы — 1 дана
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
6. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Ауыз қуысына арналған ирригатор құрылғысы

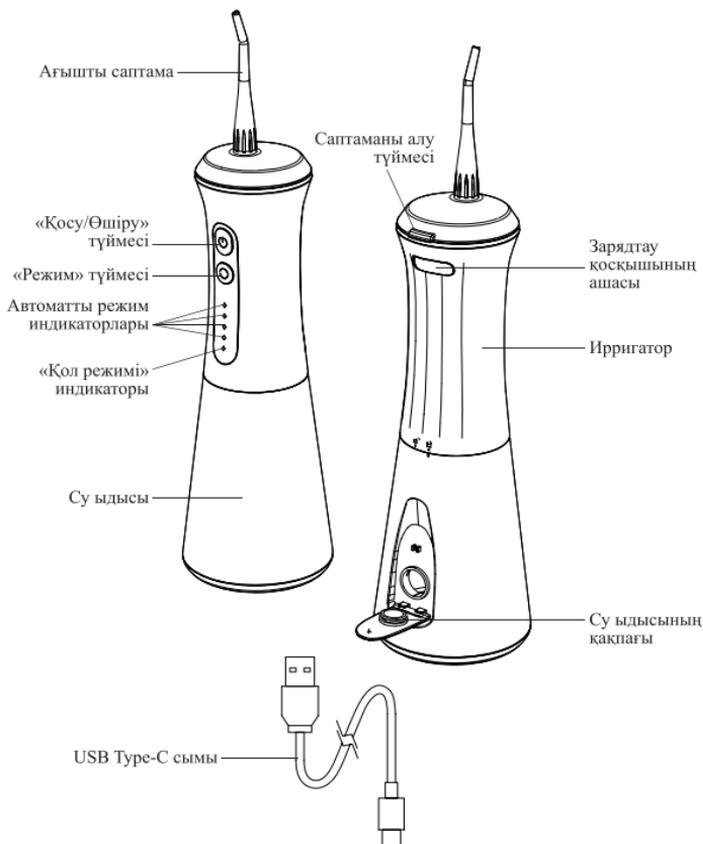

«Қосу/Өшіру» түймесі ирригаторы қосады және өшіреді.

«Режим» түймесін қысқа басу құрылғының төрт автоматты жұмыс режимін айналдырады. Бұл жағдайда **автоматты режимнің** тиісті **индикаторы** жанады. Режим атаулары индикаторлардың жанында қол қойылған. «Режим» түймесін басып тұру ирригатордың қолмен жұмыс режимін

қосады және өшіреді, ал **«Қол режимі»** шамы жанады. Қол режим қосұлы кезде «Режим» түймесін басу реактивті күштің 10 деңгейін айналдырады. Реактивті қуат деңгейі өзгерген кезде «Қол режимі» шамы жыпылықтайды.

Егер батарея заряды таусылған болса, «Қол режимі» шамы қызыл болып жыпылықтайды. «Қол режимі» шамы ирригатор зарядталған кезде қызыл түспен жанады, ал толық зарядталған кезде жасыл түспен жанады.

Жұмыс режимдері

«Норма» режимінде дәл бағытталған су ағыны тіс аралық кеңістікті және ауыздағы басқа жету қиын жерлерді тазартады.

«Жұмсақ» режимде ағынның күші «Норма» режиміне қарағанда аз болады. Егер сіз бұған дейін ирригаторды пайдаланбаған болсаңыз немесе сезімтал қызыл иектеріңіз болса, онда осы режимді орнату арқылы ирригаторды пайдалануды бастау ұсынылады. Дайын емес және сезімтал қызыл иектер судың қатты және өткір ағынына байланысты қан кете бастайды.

«Күшті» режимде ағынның күші «Норма» режиміне қарағанда үлкен.

«Импульс» режимі сағызды укалауға және ауыз қуысын пульсирленген су ағынымен жалпы тазартуға арналған. Сағыз массажы қанның микроциркуляциясын күшейтеді, бұл периодонтит пен пародонт ауруының жақсы алдын-алу болып табылады.

Қол режимі ағынның күшін қолмен реттеуге және қызыл иекке сәйкес келетінін таңдауға мүмкіндік береді.

Классикалық ағынғы саптама

Бұл саптаманың көмегімен сіз аузыңыздағы қиын жерлерді тазалай аласыз. Тіс немесе аралық кеңістікте терең «бітелген» тамақ қалдықтары су немесе арнайы ерітінді ағынымен оңай жуылады.



Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Құрылғыны қораптан шығарып, барлық орау материалдарын алып тастаңыз. Содан кейін су ыдысы мен саптамаларды жуыңыз, резервуарға су құйыңыз, реактивті саптаманы ирригатордың үстіне тоқтағанша орнатыңыз және саптаманы раковинаға бағыттап, құрылғыны сумен қосыңыз.

Бірінші қолданар алдында суарғышты зарядтаңыз.

Ирригаторды зарядтау

Егер батарея заряды таусылған болса, «Қол режимі» шамы қызыл болып жыпылықтайды.

USB Type-C сымын ирригатордағы зарядтау ұясына қоспас бұрын, ирригатор мен штепсельдің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтау қосқышының ашасын ашыңыз, USB Type-C сымын құрылғының қосқышына, содан кейін қуат көзіне қосыңыз. Құрылғыны зарядтау үшін USB қосқышы және шығыс параметрлері бар қуат көзін пайдаланыңыз: -5 В , 1 А . сондай-ақ, құрылғыны үшінші тараптың қуат көздерінен зарядтауға болады: ноутбук, қуат банкі және т. б.

Батарея зарядталған кезде «Қол режимі» шамы қызыл болып жанады. Құрылғы толығымен зарядталған кезде «Қол режим» индикаторы жасыл болып жанады. Батареяны зарядтау уақыты шамамен 4–6 сағатты құрайды. Батареяны кез келген зарядсыздану деңгейінде зарядтауға болады — зарядтау алдында батареяның алдын ала толық заряды қажет емес. Зарядтау кезінде суарғышты қосуға болмайды.

Зарядтау аяқталғаннан кейін USB Type-C сымын алдымен қуат көзінен, содан кейін құрылғыдан ажыратыңыз және зарядтау қосқышын штепсельмен жабыңыз.

Батареяны зарядтау 5-тен 40 °C-қа дейінгі температурада жүргізілуі керек, батареяны теріс температурада зарядтамаңыз және оны 45 °C-тан жоғары қыздыруға жол берменіз.

Саптаманы орнату

Саптама — бұл отбасының әр мүшесі үшін жеке аксессуар.

Саптаманы ирригатордың жоғарғы жағына дейін салыңыз.

Саптаманы алу үшін саптаманы алу түймесін басып, саптаманы жоғары қарай тартыңыз.


Саптаманы алу
түймесі



Ескерту. Жаңа ирригаторға саптаманы орнату және алу қиын болуы мүмкін.

Резервуарға суды қалай құюға болады

Резервуардың қақпағын ашыңыз, корпусы көлденеңінен еңкейтіңіз. Резервуарға су немесе арнайы ирригатор ерітіндісін құйыңыз.

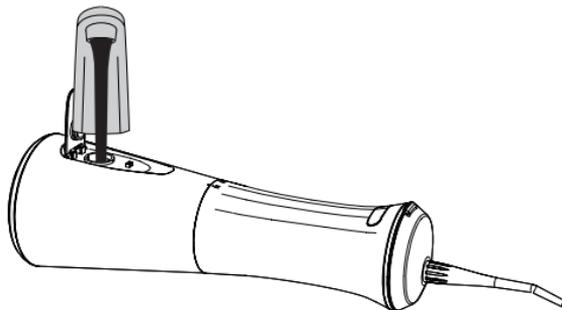

Сондай-ақ, сіз су ыдысын алып тастап, оны тік күйде толтыра аласыз. Мұны істеу үшін ирригаторды бір қолыңызбен ұстаңыз, екінші қолыңызбен резервуарды ашық құлып белгішесінің жағына бұраңыз және құрылғыдан бір жаққа тартыңыз. Содан кейін резервуарды сумен немесе арнайы ерітіндімен толтырыңыз. Ирригаторды резервуарға орнатыңыз және бекіту үшін бұраңыз.

Қайнаған суды немесе ирригаторлар үшін арнайы ерітіндіні қолданыңыз. Судың немесе ерітіндінің температурасы адамның дене температурасына жақын болуы керек (35–40 °C). Ыстық су тазалау сапасын арттырмайды және сізге зиян тигізуі мүмкін, ал тым суық су сізді ыңғайсыз етеді.

Пайдалану

1. Резервуарды «Резервуарға суды қалай құю керек» тарауында сипатталғандай сумен немесе арнайы суару ерітіндісімен толтырыңыз.
2. Саптаманы ирригатордың жоғарғы жағына дейін орнатыңыз.
3. «Режим» түймесімен сәйкес жұмыс режимін таңдаңыз, сәйкес режим индикаторы жанады. Сондай-ақ, «Режим» түймесін бірнеше секунд басып тұру арқылы қол жұмыс режимін орнатуға болады, «Қол режимі» индикаторы жанады.


Ескертулер. Режимді таңдағаннан кейін 8 секунд ішінде «Қосу/Өшіру» түймесін баспасаңыз, құрылғы автоматты түрде өшеді.

Сондай-ақ, алдымен ирригаторды «Қосу/Өшіру» түймесімен қосып, содан кейін жұмыс режимін таңдауға болады.

4. Ирригаторы қоспас бұрын оны 45° бұрышқа еңкейтіп, саптаманы аузыңызға салыңыз.

5. Раковинаның үстіне еңкейіп, аузыңызды сәл ашыңыз. Ирригаторы қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Құрылғы жұмыс істей бастайды. Егер сіз қол жұмыс режимін орнатқан болсаңыз, «Режим» түймесін басу арқылы ағынның күшін реттеңіз. Аузыңыздан су раковинаға ағып кетуі керек. Суреттегідей дәйектілікпен әрекет етіңіз: шайнайтын тістерден алдыңғы тістерге қарай жылжытыңыз, саптаманы тіс аралық кеңістікте ұстай отырып, Сағыз контуры бойымен бағыттаңыз. Шашырауды азайту үшін ирригаторды аузыңызда саптама болған кезде ғана қосыңыз және өшіріңіз.

Ескерту. Егер сіз ирригаторды бірінші рет қолдансаңыз, «Жұмсақ» режимін немесе ағынғы күштің бірінші деңгейін қолмен орнатыңыз, әйтпесе сезімтал және дайын емес қызыл иектер қатты және қатты су ағынынан жарақат алуы мүмкін.

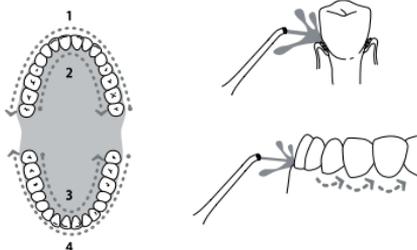

Ескерту. Ирригатордың жад функциясы бар. Келесі жолы «Режим» түймесін басқан кезде өткен пайдалану кезінде орнатылған режимнің индикаторы жанады, ал «Қосу/Өшіру» түймесін басқан кезде ирригатор өткен пайдалану кезінде орнатылған режимде қосылады.

6. Ауыз қуысын ирригатормен тазалаудың ұсынылатын уақыты — 2 минут. 3 минуттан кейін суарғыш автоматты түрде өшеді. Егер су таусылып қалса немесе тазалауды ертерек тоқтатқыңыз келсе, «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.
7. Саптаманы алу түймесін басу арқылы саптаманы алыңыз. Су ыдысын ажыратыңыз. Саптама мен су ыдысын жуыңыз.

Ескертулер. Егер сіз суды емес, арнайы суару ерітіндісін пайдалансаңыз, «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай, ирригаторы одан кейін шайыңыз.

Резервуар мен саптаманы әр қолданғаннан кейін жуып, кептіру ұсынылады. Егер бұл жасалмаса және ирригатор бірнеше күн бойы қолданылмаса, ішкі бөліктер «түншығып», кейіннен пайдаланған кезде тұрып қалған судың жағымсыз иісін тудыруы мүмкін. Су ыдысын кептіру үшін, егер ирригатор жиналған болса, су ыдысының қақпағын бірнеше сағатқа ашыңыз.

Кеңестер

Егер сіз ирригаторды бірінші рет қолданаңыз, кол режимде «Жұмсақ» режимді немесе ағынғы күштің бірінші деңгейін орнатыңыз, әйтпесе сезімтал қызыл иектер судың қатты ағынынан жарақат алуы мүмкін. Уақыт өте келе, сағыз жана сезімдерге үйренеді, ағынғы күшпен режимді таңдауға болады.

Ирригатордың жад функциясы бар. Келесі жолы «Режим» түймесін басқан кезде өткен пайдалану кезінде орнатылған режимнің индикаторы жанады, ал «Қосу/Өшіру» түймесін басқан кезде ирригатор өткен пайдалану кезінде орнатылған режимде қосылады.

Қолданудың алғашқы кезеңінде қызыл иектің аздап қан кетуі мүмкін. Егер сізде екі апта бойы ирригаторды қолданғаннан кейін қызыл иектің қатты қан кетуі байқалса, дәрігермен кеңесіңіз.

Су ыдысының қақпағын ашу немесе су қалдықтарының булануын қамтамасыз ету үшін резервуарды әр қолданғаннан кейін алып тастау ұсынылады. Егер қақпақ ашылмаса және ирригатор бірнеше күн бойы пайдаланылмаса, ішкі бөліктер «түншығып», кейіннен пайдаланған кезде тұрып қалған судың жағымсыз иісін тудыруы мүмкін.

Судың немесе ерітіндінің ұсынылған температурасы 40 °С-тан аспауы керек, өз сезімдеріңізге назар аударыңыз, уақыт өте келе сіз қандай температурада суды пайдалану ыңғайлы екенін түсінесіз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуден бұрын құрылғыны өшіріп, зарядтау қосқышының тығыны тығыз жабылғанын тексеріңіз. Ирригаторы дымкыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Саптамаларды мезгіл-мезгіл сабынмен және сумен жуыңыз. Саптамаларды тозған кезде ауыстырыңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, оны жана қосар алдында шайыңыз. Мұны істеу үшін резервуарға су құйыңыз, саптаманы раковинаға бағыттап, ирригаторды қосыңыз.

Егер сіз қайнаған судың орнына арнайы ауыз шайғыштарын қолданаңыз, уақыт өте келе бұл резервуарда және ішкі беттерде шөгінділердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін құрылғыны осындай ерітінділерді қолданғаннан кейін дереу шайыңыз. Мұны істеу үшін резервуарға таза су құйыңыз және саптаманы раковинаға бағыттап отырып, орнатылған саптамасы бар ирригаторды қосыңыз.

Құрылғының корпусына, зарядтау ұясына, басқару элементтеріне және USB Түре-С сымына су кірмеңіз.

Әкітастан тазарту

Біраз уақыттан кейін ирригатордың ішінде әк және баска шөгінділер жинала бастайды. Бұл судың қаттылығына байланысты. Тақта су ыдысында да, ішкі беттерде де жиналады. Бұл қозғалтқыштың жұмысын қиындатады және құрылғының қызмет ету мерзімін қысқартады. Әк сонымен қатар патогендер мен микроорганизмдердің көбеюі үшін пайдалы орта болып табылады. Ирригаторы тазартқыш құрылғының барлық беттерінен және жасырын элементтерінен бляшканы кетіруге көмектеседі. Мұндай құралдың нұсқауларына сәйкес әрекет етіңіз.

Сондай-ақ, 100 мл суға 3 г мөлшерінде лимон қышқылын қолдануға болады. Ирригатор резервуарына 350 мл су құйыңыз, онда еріген лимон қышқылы бар. Ирригаторы қысқа уақытқа қосыңыз, содан кейін оны 15–20 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін ирригаторы таза сумен бірнеше рет қосыңыз.

Күтім және сақтау

Ирригаторы балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Құрылғыны сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны және саптамаларды «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай жуыңыз және құрғатыңыз. Саптамаларды жоғалтпау үшін су ыдысында сақтауға болады. Ұзақ мерзімді сақтау үшін ирригаторы, саптамаларды және USB Туре-С сымын шаңнан қорғайтын қорапқа немесе пакетке салыңыз.

Құрылғыны 5-тен 40 °С-қа дейінгі температурада сақтаңыз. Егер ирригатор ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батарея сыйымдылығының төмендеуіне жол бермеу үшін оны әр 3 ай сайын жартылай зарядтаңыз. Құрылғыны жартылай зарядталған күйде сақтау ұсынылады. Мұны істеу үшін алдымен ирригаторы толығымен босатыңыз, содан кейін оны шамамен 2–3 сағат зарядтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Батарея заряды таусылды	Суару құралын «Ирригатор құралын зарядтау» тарауына сәйкес зарядтаңыз
Батарея өз ресурсын таусылды	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Суарғыш зарядталмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Ноутбук немесе компьютер қосылмаған	Құрылғыны компьютердің немесе ноутбуктің USB портынан зарядтау үшін оларды қосу керек
Қуат банкі немесе ноутбук таусылған немесе қосылмаған	Қуат банкіні зарядтаңыз және қосыңыз
Зақымдалған USB Type-C сымы	USB Type-C сымын ауыстырыңыз жұмыс істейді

Су саптаманың қорыққа қосылатын жерінен ағып кетеді

Мүмкін себеп	Шешім
Саптама тығыз орнатылмаған	Саптаманы тоқтағанша орнатыңыз

Резервуардан су ағып жатыр

Мүмкін себеп	Шешім
Су ыдысының қақпағы жабық емес немесе судың өтуіне мүмкіндік береді	Су ыдысының қақпағын жабыңыз немесе су ыдысының қақпағына орнатылған тығыздағыш сақинаны ауыстырыңыз
Резервуар дұрыс орнатылмаған	Резервуарды «Резервуарға суды қалай құю керек» тарауында сипатталғандай дұрыс орнатыңыз

Су кірмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Саптама бітеліп қалды	Саптаманы жақсылап шайыңыз, оны құрылғыға салыңыз және қолданар алдында резервуарды шайқаныз
Бляшка құрылғының ішкі беттерінде жиналды	Суару құралын «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз

Саптама алынбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Сіз саптаманы алу түймесін баспадыңыз	Саптаманы алу түймесін басып саптаманы жоғары қарай тартыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарактарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Қуат: USB Type-C = 5 В, 1 А
2. Қуаты: 5 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: III
4. Батарея: Li-Ion 3,7 В, 1,8 А*сағ (6,66 Вт*сағ)
5. Ағынғы пульсация жиілігі: 1100–1500 жж/мин
6. Су қысымы: 2,76–7,59 бар
7. Су ыдысының сыйымдылығы: 350 мл
8. Зарядтау уақыты: 4–6 сағ
9. Жұмыс режимдері: 5
10. Автоматты өшіру: 3 минуттан кейін
11. Ирригатордың жұмыс уақыты:
 - «Жұмсақ» режимде: 80 мин
 - «Норма» режимінде: 70 мин
 - «Қатты» режимде: 55 мин
 - «Импульс» режимінде: 65 мин
 - кол режимде: 60–80 мин
12. USB Type-C сымның ұзындығы: 0,7 м
13. Құрылғының өлшемі: 82 × 82 × 315 мм
14. Қаптама мөлшері: 100 × 100 × 263 мм
15. Таза салмағы: 0,31 кг
16. Жалпы салмағы: 0,49 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертифицикалған:



Өндіруші: Ханчжоу Викэнтайгер Атомобил Продактс Ко., Лтд. 6Ф Билдинг А, Пауэрлонг Сити Плаза, №3867 Биньшэн Роуд, Ханчжоу, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург к., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ, 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Су құбырларын, клапанды немесе резервуарды органикалық, тұзды немесе минералды шөгінділермен бітеу кепілдік емес. Шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін қайнатылған суды пайдалану және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілгендей жүйелі түрде тазалау қажет.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың корпустың ішіне, басқару органдарына, USB Type-C сымына және зарядтау коннекторына түсуіне байланысты құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаныңыз.

1. Жақында периодонтальды немесе стоматологиялық хирургиялық операциядан өткен адамдар, сондай-ақ ауыз қуысының проблемаларына байланысты емделушілер ирригаторды қолданар алдында емдеуші дәрігермен кеңесу керек.
2. Егер сізде екі апта бойы ирригаторды қолданғаннан кейін қызыл иектің қатты қан кетуі байқалса, дәрігерге қаралыңыз.

3. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
4. Ирригаторы тек максатына қарай және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны максатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
5. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
6. USB Type-C сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз, қуат көзінен ажыратылған кезде USB Type-C сымын тартпаңыз.
7. USB Type-C сымы немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз-оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
10. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
11. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
12. Қолданғаннан кейін қалған суды төгіп тастаңыз, су ыдысы мен саптаманы шайыңыз және құрғатыңыз.
13. Судың немесе ерітіндінің температурасы 40 °C-тан аспауы керек.
14. Ирригатордың құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
15. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
16. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
17. Егер USB Type-C сымы зақымдалған болса, оны өндірушіден немесе қызмет көрсетуден алынған арнайы сыммен немесе жинақпен ауыстыру керек.

18. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
19. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, зарядтау ұясына, басқару элементтеріне және USB Type-C сымына кіргізбеңіз.
20. Құрылғыны жылу көздерінен, сондай-ақ от пен ұшқыннан алыс ұстаңыз.
21. Құрылғының айналасында зарядтау кезінде қажетті желдетуді қамтамасыз етіңіз.
22. Зарядталғаннан кейін USB Type-C сымын алдымен қуат көзінен, содан кейін құрылғыдан ажыратыңыз. Зарядталғаннан кейін әрқашан зарядтау қосқышын штепсельмен жабыңыз.

IM-2

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау




App Store



Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз







Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқанымға қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru