


成品尺寸: 90×120mm
 颜色: 黑色 COMOYOK100
 工艺: 骑马钉装, 单色双面印刷

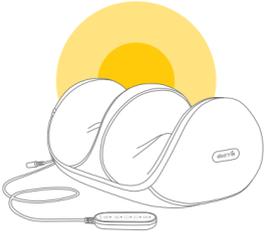

Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.
 Адрес: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China
 Сделано в Китае

Deerma
 Массажер для ног

Два в одном: массажирование и прогревание
 Многофункциональный прибор для ног и для стоп.
 Сочетание 3D массажа и прогревания, универсальный массажер для ног и ступней.

DEM-M702F

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием.
 Дополнительно с этим руководством можно ознакомиться на сайте: <http://www.deerma.com>

deerma

Обязательная инструкция для пользователя.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее.

Противопоказания
 Необходимо использовать с осторожностью в следующих ситуациях и со следующими лицами:

- Лица, в тела которых имплантированы медицинские электротехнические изделия, связанные с кардиостимуляторами.
- Лица, в тела которых имплантированы металлические, силиконовые или пластмассовые материалы в связи с переломами или с пластической операцией.
- Лица с поврежденной кожей
- Лица с температурой тела выше 38 °C
- Лица, склонные к изменению тела
- Лица, не приспособленные к использованию респиратора
- Лица с гипертонией
- Лица, имеющие острые симптомы заболеваний внутренних органов (гастрит, гепатит, гастронтерит и др.)
- Лица, лишенные чувствительности к температуре
- Лица с парестезией
- Лица с наличием деформированного артрита, воспаления оуставов или подagra
- Лица, не чувствительные к нагреву внешнего элемента прибора, должны быть внимательными при его использовании
- Использование запрещено в следующих ситуациях и со следующими лицами
- Лица недееспособны или не имеют физической возможности использовать устройство
- Данный прибор не подходит для людей с физическими, психическими отклонениями, для людей с проблемами органов чувств, а также для людей с недостатком опыта и знаний (включая детей). В случае возникновения аномальных реакций, таких как боли в пояснице, головокружение, рвота, учащенное сердцебиение и т.д., немедленно прекратите использование устройства.
- Установленное время одной процедуры составляет 15 минут, проводите каждую процедуру не более 30 минут, после использования дайте прибору отдохнуть в течение 30 минут, чтобы продлить его срок службы.
- Не используйте устройство в следующих ситуациях
- в случае сильной усталости

1

deerma

- в течение часа до и после еды
 - В состоянии алкогольного опьянения процедуру не более 20 минут, после использования дайте прибору отдохнуть в течение 20 минут, чтобы продлить его срок службы.
 Не используйте устройство в следующих ситуациях:
 - в случае сильной усталости.
 - в течение часа до и после еды.
 - в состоянии алкогольного опьянения.

Меры предосторожности при использовании

Перед использованием убедитесь, что прибор находится в исправном состоянии. При обнаружении неисправностей, вне зависимости от их размера и значения, немедленно прекратите использование устройства.
 Регулярно очищайте адаптер от пыли. Скопление пыли на щетке может легко привести к ухудшению изоляции из-за влаги, что в конечном итоге может привести к возгоранию.
 Если прибор не работает или вызывает подозрение, немедленно прекратите его использование.
 При сборе питания вытаскивайте адаптер из розетки.
 Обязательно вытаскивайте адаптер из розетки, когда устройство не используется. Ни в коем случае не разбирайте, не переделывайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно, и не открывайте замки самостоятельно.
 Не используйте изделие при наличии воды в человеческом теле, чтобы избежать удар электрическим током.
 Не тяните прибор сильно и не протыкайте его ногой или другими острыми предметами.
 Во время обслуживания прибора обязательно отключите питание и вытаскивайте адаптер из розетки.
 Используйте оригинальную упаковку надлежащим способом и храните ее в недоступном для детей месте.
 Не разбирайте не модифицируйте устройство, не допускайте попадания воды на элементы устройства или его контроллер, держите устройство подальше от огня. В противном случае устройство будет повреждено.
 Не повреждайте, не модифицируйте, не сбивайте и не тяните с силой шнур питания. Кроме того, не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и не сжимайте его.
 Во время чистки и технического обслуживания устройства не используйте бензин.

2


deerma

эфирные масла, разжижающие средства, спирт, сильнощелочные моющие средства, отбеливатель и т.д.
 Храните устройство в недоступном для детей месте, не позволяйте детям прикасаться к устройству и пользоваться им. В противном случае это может привести к ожогам, паразитию электрическим током или другим травмам.
 Перед тем как убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть.

Функции прибора

Устройство предназначено для разминания мышц и расслабления. Прибор оснащен прогревающим компрессом, что позволяет эффективно убрать дискомфорт в ногах и ступнях. Два режима массажа и два уровня интенсивности массажа позволяют подобрать для себя подходящий вид массажа и получить больше наслаждений.

Наименование элементов

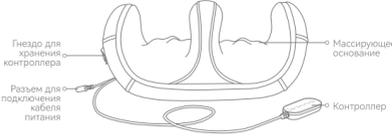

3

deerma

Наименование элементов


Название продукта: Массажер для ног	Номинальная мощность: 24 Вт
Модель: DEM-M702F	Размер: 395*255*196 мм
Номинальное напряжение: 12 В ---	Вес нетто: ≈1.3 кг

Комплектация: Массажер x1, Адаптер питания x1, Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон x1, Краткое руководство x1

Способ применения

Перед применением обратите внимание на:

1. Проверьте устройство и его комплектацию.
2. Снимите подвеску и украшения, чтобы избежать их воздействия при массаже.
3. Положите массажер на пол или на диван, чтобы зафиксировать его.
4. Удобно расположите в устройстве необходимую для массажа часть тела (ноги или стопы).

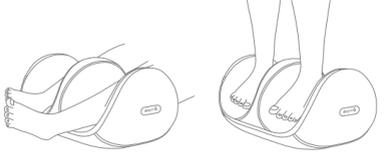

Внимание: Запрещается вставлять на прибор, чтобы избежать его повреждения и возникновения других возможных опасностей.

4

deerma

Применение функций

Кнопка питания (I)

1. Коротко нажмите, чтобы включить устройство. По умолчанию будет выставлен режим массажа стоп, а также будет активирована функция прогревания. Соответствующие световые индикаторы загорятся постоянно.
2. Установленное время использования устройства – 15 минут, после чего устройство самостоятельно выключится. При необходимости остановить процесс массажа раньше этого времени, коротко нажмите кнопку питания для выключения устройства.

Кнопка режима массажа стоп (II)

1. Для переключения в режим массажа стоп, коротко нажмите эту кнопку. Загорится световой индикатор постоянно.

Кнопка режима массажа ног (III)

1. Для переключения в режим массажа ног, коротко нажмите эту кнопку. Загорится световой индикатор постоянно.

Кнопка выставления уровня мощности (IV)

1. При включении устройства по умолчанию выставляется низкий уровень интенсивности массажа. Этому соответствует гланное мигание светового индикатора. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выставить высокий уровень интенсивности. Световой индикатор загорится постоянно.

Кнопка нагревающего элемента (V)

1. При включении устройства функция прогревания запускается автоматически, также загорается соответствующий световой индикатор.
2. Нажмите эту кнопку еще раз, и функция прогревания будет отключена, а световой индикатор погаснет.



5

deerma

Техническое обслуживание и уход

Способ ухода за прибором

1. Для удаления пыли с пани устройства можно использовать пылесос, также ткань можно аккуратно протереть чистой тряпкой.
2. Грязь с поверхности устройства можно удалить чистой тряпкой.
3. Для удаления более глубокого загрязнения слегка смочите тряпку нейтральным моющим средством, а затем аккуратно протрите поверхность.
4. Не допускайте попадания воды внутрь изделия.
5. Оставьте устройство высыхать естественным путем.
6. Внешний чехол прибора не снимается для чистки.
7. После использования не оставляйте устройство во влажных местах и местах прямого попадания солнечных лучей.
8. Перед техническим обслуживанием обязательно выключите устройство и вытаскивайте адаптер питания, но не делайте этого мокрыми руками.
9. При длительном неиспользовании устройства необходимо отключить его и вытаскивать адаптер питания. Храните прибор в оригинальной упаковке, накрывайте его прозрачным кожухом.
10. При взаимодействии с устройством не используйте спирт, растворитель для краски, бензин или лак для ногтей. В противном случае это может привести к повреждению прибора, к растрескиванию или выцветанию его элементов.
11. Данный прибор можно использовать только с приложенным в комплекте оригинальным адаптером питания.

6

deerma

Диагностика неисправностей

В этом разделе перечислены часто задаваемые вопросы о данном продукте. Если вы не можете найти в ней ответ на возникшую проблему, обратитесь на горячую линию обслуживания или в авторизованный сервисный центр в вашем регионе.

Описание проблемы	Возможны причины	Способы решения
Массажер не работает	Массажер не был включен. Прошло 15 минут после включения устройства, и оно автоматически отключилось. На устройство оказывается слишком большое весовое давление. Например, кто-то встал на устройство или положил на него что-то тяжелое).	Коротко нажмите кнопку включения. Если Вы хотите запустить процесс массажа еще раз, включите устройство. Уберите лишние тяжелые предметы.
Неожиданно выключился во время работы.	Отсутствует сеть питания.	Пожалуйста, проверьте, подключено ли устройство к розетке
Устройство издает звук.	Работает внутренний	Нет необходимости.
Устройство дымится	Произошло внутреннее короткое замыкание.	Немедленно выключите устройство и обратитесь в сервисный центр.

7

deerma

После длительного перерыва в использовании обязательно проверьте работоспособность прибора, прежде чем снова его использовать.

Регулярный осмотр	Любые из следующих неисправностей	При возникновении любой из вышеперечисленных неисправностей, во избежание несчастных случаев, немедленно прекратите использование изделия, отключите питание и отправьте его в наш пункт технического обслуживания.
	<ul style="list-style-type: none"> · Нагревается блок питания · Провод поврежден или деформирован, присутствует запах гари · Во время работы устройства обнаружен необычный для него звук или вибрация · После включения и выключения устройство не работает должным образом · Поврежден корпус устройства или кожаная подкладка 	

Внимание:
 В случае, если неисправность не может быть устранена или прибор не работает должным образом, обратитесь в центр обслуживания клиентов. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать устройство самостоятельно.

8

deerma

Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User (Имя пользователя) _____
 Telephone (Телефон) _____
 Model (Модель) _____
 Date of Purchase (Дата покупки) _____
 Warranty Period (Срок гарантии) 12 Months (12 месяцев)
 Service Life (Срок службы) 2 Years (2 года)

Proof of warranty.
 (Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.)
 (Please contact the seller to deal with after sales.)
 (Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)

EAC

9