

**Здоровье
зубов?
Я ГОТОВ!**



**Ирригатор
для полости рта
КТ-5942**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке **RUS**

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство ирригатора для полости рта	6
Подготовка к работе и использование	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности	15

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы **KZ**


Жалпы мәліметтер	18
Жинақтау	19
Ауыз қуысына арналған ирригатор құрылғысы	20
Жұмысқа дайындық және пайдалану	21
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	25
Күтім және сақтау	26
Ақаулықтарды жою	26
Техникалық сипаттамалары	28
Сақтық шаралары	29

Общие сведения

Ирригатор KT-5942 — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для ирригаторов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начните очистку.

После еды остатки пищи застревают между зубами, забиваются в карманы десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флоссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Также зубной нитью можно механически повредить десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флоссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и налет из межзубного пространства и десневых карманов. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболевания десен. Ирригатор считается самым гигиеничным вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен для людей с брекетами, протезами или коронками.

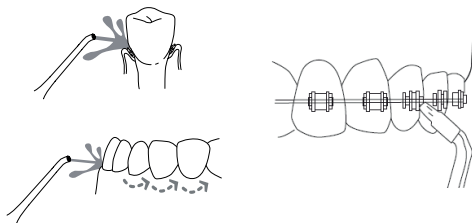

Модель KT-5942 является портативным ирригатором, который можно брать с собой в путешествия или на работу.

Прибор работает в пяти режимах: «Мягко», «Бережно», «Норма», «Сильно» и «Пульс». Если вы до этого не пользовались ирригатором, то начните с режима «Мягко», так как неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и тонкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете выбрать режим с большей силой струи.

Прибор автоматически отключается через 1,5 минуты без нажатия на кнопки.

У ирригатора есть резервуар для воды емкостью 270 мл, которого хватает для тщательной обработки полости рта. В комплекте к ирригатору идут две классических струйных насадки.

RUS

Ирригатор для полости рта
КТ-5942


В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменяет собой зубную щетку, он является частью комплексного ухода за полостью рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш лечащий врач-стоматолог. Обычно уход включает в себя ирригацию, чистку зубов зубной щеткой и ершиками, полоскание рта ополаскивателем и использование зубной нити, если это необходимо. Ирригатор рекомендуют стоматологи во всем мире.

Комплектация

1. Ирригатор с заглушкой разъема для зарядки и всасывающей трубкой с фильтром — 1 шт.
2. Резервуар для воды с уплотнительным кольцом крышки резервуара — 1 шт.
3. Струйная насадка — 2 шт.
4. USB-шнур — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ирригатора для полости рта

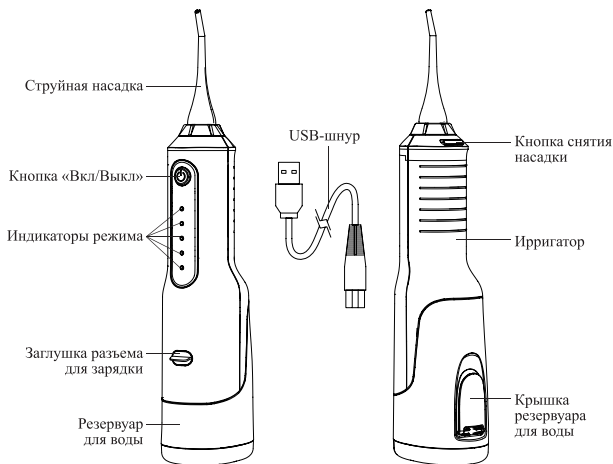

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает прибор, а также переключает пять режимов работы.

Короткое нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает и выключает работу ирригатора.

Нажатие с удержанием на кнопку «Вкл/Выкл» циклически переключает режимы работы устройства. При этом загорается соответствующий **индикатор режима**. Названия режимов подписаны рядом с индикаторами.

Режимы работы

В **режиме «Норма»** точно направленная струя воды очищает межзубное пространство и другие труднодоступные места во рту.

Режимы «Мягко», «Бережно» и «Сильно» отличаются силой струи по сравнению с режимом «Норма».

В **режиме «Мягко»** самая слабая сила струи. Если вы до этого не пользовались ирригатором или у вас чувствительные десны, то рекомендуется начинать пользоваться ирригатором, установив этот режим. Неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды.

RUS

Ирригатор для полости рта КТ-5942

В режиме *«Бережно»* сила струи больше, чем в режиме *«Мягко»*, но меньше, чем в режиме *«Норма»*.

В режиме *«Сильно»* сила струи больше, чем в режиме *«Норма»*.

Режим *«Пульс»* предназначен для массажа десен и общей чистки полости рта пульсирующей струей воды. Массаж десен усиливает микроциркуляцию крови, что является хорошей профилактикой пародонтита и пародонтоза.

Классическая струйная насадка



С помощью данной насадки можно очистить труднодоступные места во рту. Остатки пищи, которые глубоко «забиваются» в зубных или междесневых пространствах, с легкостью вымываются потоком воды или специального раствора.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Затем вымойте резервуар для воды и насадки, налейте воду в резервуар, установите струйную насадку сверху ирригатора до упора и включите прибор с водой, направляя насадку в раковину.

Перед первым использованием зарядите ирригатор.

Зарядка ирригатора

Если ирригатор разряжен, все индикаторы режима будут мигать.

Перед подключением USB-шнура к разъему для зарядки на ирригаторе убедитесь, что ирригатор и заглушка сухие. Снимите заглушку разъема для зарядки, подключите USB-шнур к разъему устройства, а затем к источнику питания. Для зарядки устройства используйте блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: $\sim 5\text{ В}$, 1 А . Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикаторы режима по очереди загораются и гаснут. Чем больше индикаторов режима горит непрерывно, тем выше уровень заряда. Когда устройство полностью зарядится, все индикаторы режима будут гореть непрерывно. Время зарядки аккумулятора составляет примерно 4–6 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряда-

ности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки ирригатор не включать.

По окончании зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства и закройте разъем для зарядки заглушкой.


Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Установка насадки

Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи.

Вставьте насадку сверху ирригатора до упора.


Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх.

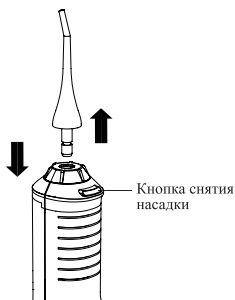

Примечание. Установка и снятие насадки в новом ирригаторе могут быть затруднительными.

Как налить воду в резервуар

Откройте крышку резервуара, наклоните корпус горизонтально. Налейте воду или специальный раствор для ирригаторов в резервуар.

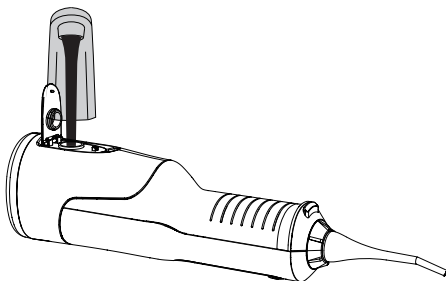


Также вы можете снять резервуар для воды и наполнить его в вертикальном положении. Для этого удерживайте ирригатор одной рукой, другой рукой потяните резервуар вниз. Для этого могут потребоваться некоторые усилия, будьте осторожны, чтобы не повредить резервуар. Затем наполните резервуар водой или специальным раствором. Установите ирригатор на резервуар до упора.

Используйте кипяченую воду или специальный раствор для ирригаторов. Температура воды или раствора должна быть близкой к температуре тела человека (35–40 °C). Горячая вода не повышает качество чистки и может навредить вам, а слишком холодная вода может вызвать неприятные ощущения.

Использование

1. Заполните резервуар водой или специальным раствором для ирригаторов, как описано в разделе «Как налить воду в резервуар».
2. Установите насадку сверху ирригатора до упора.
3. Перед тем как включить ирригатор, наклоните его под углом 45° и поместите насадку в рот.
4. Наклонитесь над раковиной, слегка приоткройте рот. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить ирригатор. Прибор начнет работу, загорится индикатор режима, выбранного при предыдущем использовании. Чтобы переключить режим, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Во время выполнения процедуры не глотайте жидкость: пусть она стекает в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке: двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте ирригатор только при нахождении насадки во рту.

Примечание. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, то установите режим «Мягко», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмированы резким и сильным потоком воды.

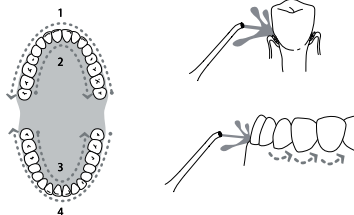

Примечание. У ирригатора есть функция памяти. В следующий раз при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» ирригатор начнет работу в том режиме, который был установлен при прошлом использовании.

5. Рекомендуемое время чистки ротовой полости при помощи ирригатора составляет около 2 минут. Ирригатор автоматически выключится через 1,5 минуты без нажатия на кнопки. Если вода закончилась или вы хотите прекратить чистку раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Снимите насадку, нажав на кнопку снятия насадки. Отсоедините резервуар для воды. Вымойте насадку и резервуар для воды.

Примечания. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для ирригаторов, то обязательно промойте ирригатор после него, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Резервуар и насадку рекомендуется промывать и просушивать после каждого использования. Если этого не делать и не пользоваться ирригатором несколько дней, то внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды. Чтобы резервуар для воды мог просохнуть, откройте крышку резервуара для воды на несколько часов, когда ирригатор стоит в собранном виде.

Советы

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Мягко», иначе чувствительные десны могут быть травмированы резким потоком воды. Со временем десны привыкнут к новым ощущениям, и можно будет выбрать режим с большей силой струи.

У ирригатора есть функция памяти. В следующий раз при нажатии на кнопку «Вкл/Выкл» ирригатор начнет работу в том режиме, который был установлен при прошлом использовании.

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, проконсультируйтесь с врачом.

Рекомендуется открывать крышку резервуара для воды или снимать резервуар после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарялись. Если не открывать крышку и не пользоваться ирригатором несколько дней, то внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды.

Рекомендуемая температура воды или раствора должна быть не выше 40 °С, ориентируйтесь на свои ощущения, со временем вы поймете, воду какой температуры использовать комфортнее всего.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания выключите прибор и убедитесь, что заглушка разъема для зарядки плотно закрыта. Протирайте ирригатор влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Периодически промывайте насадки водой с мылом. Меняйте насадки по мере износа.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его перед новым включением. Для этого налейте в резервуар воду и включите ирригатор, направляя насадку в раковину.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать, промывайте устройство сразу же после использования таких растворов. Для этого налейте в резервуар чистую воду и включите ирригатор с установленной насадкой, направляя насадку в раковину.

Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на органы управления и USB-шнур.

Очистка от известкового налета

Внутри ирригатора по истечении некоторого времени начинают скапливаться известковый налет и прочие отложения. Это зависит от жесткости воды. Налет копится как в резервуаре для воды, так и на внутренних поверхностях. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет со всех поверхностей и скрытых элементов устройства. Действуйте согласно инструкции к такому средству.

Также вы можете воспользоваться лимонной кислотой из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте 270 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар ирригатора. Включите ненадолго ирригатор, после этого оставьте на 15–20 минут. Затем включите ирригатор с чистой водой несколько раз.

Уход и хранение

Храните ирригатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, вымойте и просушите его и насадки, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Насадки можно хранить в резервуаре для воды, чтобы они не потерялись. На длительное хранение уберите ирригатор, насадки и USB-шнур в коробку или пакет для защиты от пыли.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство и аксессуары. Если ирригатор не используется в течение длительного времени, заряжайте его наполовину каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите ирригатор, затем заряжайте его примерно 2–3 часа.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите ирригатор в соответствии с разделом «Зарядка ирригатора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Ирригатор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк или ноутбук разряжены или не включены	Зарядите и включите пауэрбанк или ноутбук
Поврежден USB-шнур	Замените USB-шнур на исправный

Вода вытекает из места соединения насадки с корпусом

Возможная причина	Решение
Насадка установлена неплотно	Установите насадку до упора

Из резервуара вытекает вода

Возможная причина	Решение
Крышка резервуара для воды не закрыта или пропускает воду	Закройте крышку резервуара для воды или замените уплотнительное кольцо, установленное на крышку резервуара для воды
Резервуар неправильно установлен	Установите резервуар правильно, как описано в разделе «Как налить воду в резервуар»

Вода не поступает

Возможная причина	Решение
Насадка засорилась	Хорошо промойте насадку, вставьте ее в прибор и встряхните резервуар перед использованием
Налет накопился на внутренних поверхностях прибора	Произведите очистку ирригатора, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Насадка не снимается

Возможная причина	Решение
Вы не нажали на кнопку снятия насадки	Нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: $\approx 5\text{ В}, 1\text{ А}$
2. Мощность: 5 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,8 А*ч (6,66 Вт*ч)
5. Частота пульсации струи: 1100–1500 имп/мин
6. Давление воды: 2,1–6,9 бар
7. Емкость резервуара для воды: 270 мл
8. Время зарядки: 4–6 ч
9. Режимов работы: 5
10. Автоотключение: через 1,5 мин
11. Время работы ирригатора:
 - в режиме «Мягко»: 100 мин
 - в режиме «Бережно»: 90 мин
 - в режиме «Норма»: 85 мин
 - в режиме «Сильно»: 80 мин
 - в режиме «Пульс»: 90 мин
12. Длина USB-шнура: 0,7 м
13. Размер устройства: 58 × 90 × 305 мм
14. Размер упаковки: 102 × 67 × 256 мм
15. Вес нетто: 0,33 кг
16. Вес брутто: 0,52 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Ханчжоу Викэнтайгер Атомобил Продактс Ко., Лтд. 6Ф Билдинг А, Пауэрлонг Сити Плаза, №3867 Биньшэн Роуд, Ханчжоу, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую воду и регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления, на USB-шнур и в разъем для зарядки не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Людям, которые недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением ирригатора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу.
3. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
4. Используйте ирригатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за USB-шнур. Не тяните за USB-шнур при отключении от источника питания.

7. Не используйте устройство, если USB-шнур или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования, промывайте и просушивайте резервуар для воды и насадку.
13. Температура воды или раствора должна быть не выше 40 °C.
14. Не допускайте падения ирригатора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в разъем для зарядки, на органы управления и USB-шнур.
20. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
21. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
22. После зарядки отсоедините USB-шнур сначала от источника питания, затем от устройства. После зарядки всегда закрывайте разъем для зарядки заглушкой.

**Тіс денсаулығы?
Мен дайынмын!**

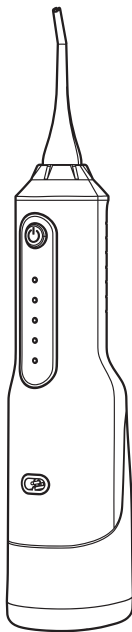

**КТ-5942
ауыз қуысына
арналған ирригаторы**


KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-5942 ирригаторы — ауыз қуысын күтуге арналған құрал. Оны пайдалану өте оңай: резервуарға су (немесе арнайы ирригатор ерітіндісі) құйыңыз, өзіңізге сәйкес режимді таңдап, тазалауды бастаңыз.

Тамақтанғаннан кейін тамақ қалдықтары тістердің арасына жабысып, қызыл иектің қалтасына бітеліп қалады. Мұндай жағдайларда тіс жібі немесе флоссер көмекке келуі мүмкін. Бірақ тістерді жіппен тазалау үшін қолдың тазалығын қамтамасыз ету керек, оларды жуу мүмкіндігі әрдайым бола бермейді. Әйтпесе, патогендік бактериялар мен вирустардың ауыз қуысына ену ықтималдығы артады. Сондай-ақ, тіс жіптері сіздің қызыл иегіңізді механикалық зақымдауы мүмкін.

Ирригатор жіпті немесе флоссерді ішінара алмастыра алады. Жіңішке және күшті су ағыны тамақ қалдықтары мен налетті тіс аралық кеңістіктен және қызыл иек қалталарынан тазартады. Су ағыны қол жетпейтін жерлерді тазартып қана қоймайды, сонымен қатар қызыл иекті мұқият укалайды, бұл қызыл иек ауруының алдын алады. Ирригатор ауыз қуысын күтудің ең гигиеналық нұсқасы болып саналады. Бұл әсіресе бреккет қиетін адамдар үшін және протездері немесе тәждері бар адамдар үшін пайдалы болады.

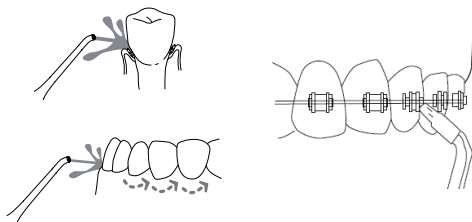

КТ-5942 моделі — бұл портативті ирригатор, оны саяхатқа немесе жұмысқа апаруға болады.

Құрылғы бес режимде жұмыс істейді: «Жұмсақ», «Ұқыпты», «Норма», «Күшті» және «Импульс». Егер сіз бұған дейін ирригаторды пайдаланбаған болсаңыз, онда «Жұмсақ» режимді бастаңыз, өйткені дайын емес және сезімтал қызыл иектер судың күшті және жұқа ағынына байланысты қан кете бастайды. Сағыз үйреніп, күшейген кезде, сіз көбірек реактивті режимді таңдай аласыз.

Құрылғы түймелерді баспай 1,5 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Ирригаторда ауыз қуысын мұқият өңдеуге жеткілікті 270 мл су ыдысы бар. Екі классикалық реактивті саптама ирригаторға жинақталған.


Профилактикалық мақсатта әр ересек адамға ирригатор қажет. Ирригатор тіс щеткасын алмастырмайды, ол ауыз қуысының кешенді күтімінің бөлігі болып табылады. Сіз үшін кешенді күтімді сіздің стоматологиялық дәрігеріңіз таңдауы керек. Әдетте күтім мыналарды қамтиды: суару, тістерді тіс щеткасымен және щеткамен тазалау, ауызды шаю және қажет болған жағдайда жіппен тазалау. Ирригаторды бүкіл әлемдегі стоматологтар ұсынады.

Жинақтау

1. Зарядтау коннекторының ашасы және сүзгісі бар сорғыш түтігі бар ирригатор — 1 дана
2. Резервуар қақпағының тығыздағыш сақинасы бар су ыдысы — 1 дана
3. Сиялы саптама — 2 дана
4. USB сымы — 1 дана
5. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
6. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Ауыз қуысына арналған ирригатор құрылғысы

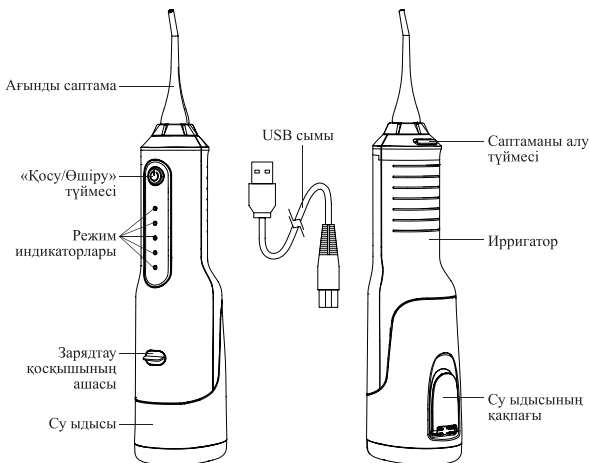

«Қосу/Өшіру» түймесі құрылғыны қосады және өшіреді, сонымен қатар бес жұмыс режимін ауыстырады.

«Қосу/Өшіру» түймесін қысқа басу ирригатордың жұмысын қосады және өшіреді.

«Қосу/Өшіру» түймесін басып тұру құрылғының жұмыс режимдерін айналдырады. Бұл ретте тиісті **режим индикаторы** жанады. Режим атаулары индикаторлардың жанында қол қойылған.

Жұмыс режимдері

«Норма» режимінде дәл бағытталған су ағыны тіс аралық кеңістікті және ауыздағы басқа жету қиын жерлерді тазартады.

«Жұмсақ», «Ұқыпты» және «Қатты» режимдері «Норма» режимімен салыстырғанда ағынмен ерекшеленеді.

«Жұмсақ» режимде ағынның ең әлсіз күші бар. Егер сіз бұған дейін ирригаторды пайдаланбаған болсаңыз немесе сезімтал қызыл иектеріңіз болса, онда осы режимді орнату арқылы ирригаторды пайдалануды бастау ұсынылады. Дайын емес және сезімтал қызыл иектер судың қатты және өткір ағынына байланысты қан кете бастайды.

«Ұқыпты» режимде ағынның күші «Жұмсақ» режимге қарағанда үлкен, бірақ «Қалыпты» режимге қарағанда аз.

«Күшті» режимде ағынның күші «Норма» режиміне қарағанда үлкен.

«Пульс» режимі сағызды уқалауға және ауыз қуысын пульсирленген су ағынымен жалпы тазартуға арналған. Сағыз массажы қанның микроциркуляциясын күшейтеді, бұл периодонтит пен пародонт ауруының жақсы алдын-алу болып табылады.

Классикалық ағынды саптама



Бұл саптаманың көмегімен сіз аузыңыздағы қиын жерлерді тазалай аласыз. Тіс немесе аралық кеңістікте терең «бітелген» тамақ қалдықтары су немесе арнайы ерітінді ағынымен оңай жуылады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Құрылғыны қораптан шығарып, барлық орау материалдарын алып тастаңыз. Содан кейін су ыдысы мен саптамаларды жуыңыз, резервуарға су құйыңыз, ағынды саптаманы ирригатордың үстіне тоқтағанша орнатыңыз және саптаманы раковинаға бағыттап, құрылғыны сумен қосыңыз.

Бірінші қолданар алдында ирригаторды зарядтаңыз.

Ирригаторды зарядтау

Егер ирригатор заряды таусылса, барлық режим шамдары жыпылықтайды.

USB сымын ирригатордағы зарядтау ұясына қоспас бұрын, ирригатор мен штепсельдің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Зарядтау қосқышының ашасын алыңыз, USB сымын құрылғының қосқышына, содан кейін қуат көзіне қосыңыз. Құрылғыны зарядтау үшін USB қосқышы және шығыс параметрлері бар қуат көзін пайдаланыңыз: ≈ 5 В, 1 А. сондай-ақ, құрылғыны үшінші тараптың қуат көздерінен зарядтауға болады: ноутбук, қуат банкі және т. б.

Батарея зарядталған кезде режим шамдары кезек-кезек жанып, сөнеді. Режим индикаторлары үздіксіз жанған сайын заряд деңгейі соғұрлым жоғары болады. Құрылғы толық зарядталған кезде барлық режим шамдары үздіксіз жанады. Батареяны зарядтау уақыты шамамен 4–6 сағатты құрайды. Батареяны кез келген зарядсыздану деңгейінде зарядтауға болады — зарядтау

алдында батареяның алдын ала толық заряды қажет емес. Зарядтау кезінде ирригаторды қосуға болмайды.

Зарядтау аяқталғаннан кейін USB сымын алдымен қуат көзінен, содан кейін құрылғыдан ажыратыңыз және зарядтау қосқышын штепсельмен жабыңыз.


Батареяны зарядтау 5-тен 40 °C-қа дейінгі температурада жүргізілуі керек, батареяны теріс температурада зарядтамаңыз және оны 45 °C-тан жоғары қыздыруға жол бермеңіз.

Саптаманы орнату

Саптама — бұл отбасының әр мүшесі үшін жеке аксессуар.

Саптаманы ирригатордың жоғарғы жағына дейін салыңыз.


Саптаманы алу үшін саптаманы алу түймесін басып, саптаманы жоғары қарай тартыңыз

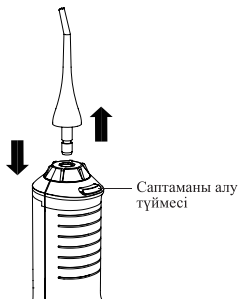

Ескерту. Жаңа ирригаторға саптаманы орнату және алу қиын болуы мүмкін.

Резервуарға суды қалай құюға болады

Резервуардың қақпағын ашыңыз, корпусты көлденеңінен еңкейтіңіз. Резервуарға су немесе арнайы ирригаторы ерітіндісін құйыңыз.

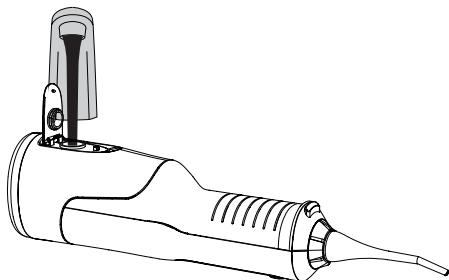


Сондай-ақ, сіз су ыдысын алып тастап, оны тік күйде толтыра аласыз. Мұны істеу үшін ирригаторды бір қолыңызбен ұстаңыз, екінші қолыңызбен резервуарды төмен қарай тартыңыз. Бұл біраз күш жұмсауды қажет етуі мүмкін, резервуарға зақым келтірмеу үшін абай болыңыз. Содан кейін резервуарды сумен немесе арнайы ерітіндімен толтырыңыз. Ирригаторды резервуарға дейін орнатыңыз.

Қайнаған суды немесе ирригаторлар үшін арнайы ерітіндіні қолданыңыз. Судың немесе ерітіндінің температурасы адамның дене температурасына жақын болуы керек (35–40 °C). Ыстық су тазалау сапасын арттырмайды және сізге зиян тигізуі мүмкін, ал тым суық су ыңғайсыздықты тудыруы мүмкін.

Пайдалану

1. Резервуарды «Резервуарға суды қалай құю керек» бөлімінде сипатталғандай сумен немесе арнайы ирригатор ерітіндісімен толтырыңыз.
2. Саптаманы пайдалану кезінде таңдалған режим индикаторы жанады.
3. Ирригаторды коспас бұрын оны 45° бұрышқа еңкейтіп, саптаманы аузыңызға салыңыз.
4. Раковинаның үстіне еңкейіп, аузыңызды сәл ашыңыз. Ирригаторды қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Құрылғы жұмыс істей бастайды, алдыңғы пайдалану кезінде таңдалған режим индикаторы жанады. Режимді ауыстыру үшін «Қосу/Өшіру» түймесін басып тұрыңыз. Процедураны орындау кезінде сұйықтықты жұтып қоймаңыз: ол раковинаға ағып кетсін. Суреттегідей дәйектілікпен әрекет етіңіз: шайнайтын тістерден алдыңғы тістерге қарай жылжытыңыз, саптаманы тіс аралық кеңістікке ұстай отырып, сағыз контуры бойымен бағыттаңыз. Шашырауды азайту үшін ирригаторды аузыңызда саптама болған кезде ғана қосыңыз және өшіріңіз.

Ескерту. Егер сіз ирригаторды бірінші рет қолдансаңыз, онда «Жұмсақ» режимін орнатыңыз, әйтпесе сезімтал және дайын емес қызыл иектер қатты және қатты су ағынынан жарақат алуы мүмкін.

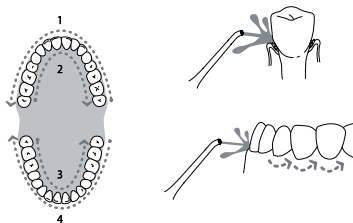

Ескерту. Ирригатордың жад функциясы бар. Келесі жолы «Қосу/Өшіру» түймесін басқан кезде ирригатор бұрын пайдаланылған режимде жұмыс істей бастайды.

5. Ауыз қуысын ирригатормен тазалаудың ұсынылатын уақыты шамамен 2 минутты құрайды. Ирригатор түймелерді баспай-ақ 1,5 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Егер су таусылып қалса немесе тазалауды ертерек тоқтатқыңыз келсе, «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз.
6. Саптаманы алу түймесін басу арқылы саптаманы алыңыз. Су ыдысын ажыратыңыз. Саптама мен су ыдысын жуыңыз.

Ескертулер. Егер сіз суды емес, ирригаторға арналған арнайы ерітіндіні қолданған болсаңыз, онда «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай, ирригаторды жуыңыз.

Резервуар мен саптаманы әр қолданғаннан кейін жуып, кептіру ұсынылады. Егер бұл жасалмаса және ирригатор бірнеше күн бойы қолданылмаса, онда ішкі бөліктер «тұншығып», кейіннен пайдаланған кезде тұрып қалған судың жағымсыз иісін тудыруы мүмкін. Су ыдысының кебуіне мүмкіндік беру үшін ирригатор жиналған кезде бірнеше сағат бойы су ыдысының қақпағын ашыңыз.

Кенестер

Егер сіз ирригаторды бірінші рет қолдансаңыз, «Жұмсақ» режимін орнатыңыз, әйтпесе сезімтал қызыл иектер судың қатты ағынынан жарақат алуы мүмкін. Уақыт өте келе, сағыз жаңа сезімдерге үйренеді, реактивті күшпен режимді таңдауға болады.

Ирригатордың жад функциясы бар. Келесі жолы «Қосу/Өшіру» түймесін басқан кезде ирригатор бұрын пайдаланылған режимде жұмыс істей бастайды.

Қолданудың алғашқы кезеңінде қызыл иектің аздап қан кетуі мүмкін. Егер сізде екі апта бойы ирригаторды қолданғаннан кейін қызыл иектің қатты қан кетуі байқалса, дәрігермен кеңесіңіз.

Су ыдысының қақпағын ашу немесе су қалдықтарының булануын қамтамасыз ету үшін резервуарды әр қолданғаннан кейін алып тастау ұсынылады. Егер қақпақ ашылмаса және ирригатор бірнеше күн бойы қолданылмаса, онда ішкі бөліктер «түншығып», кейіннен пайдаланған кезде тұрып қалған судың жағымсыз иісін тудыруы мүмкін.

Судың немесе ерітіндінің ұсынылған температурасы 40 °C-тан аспауы керек, өз сезімдеріңізге назар аударыңыз, уақыт өте келе сіз суды қай температурада қолдануға ыңғайлы екенін түсінесіз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуден бұрын құрылғыны өшіріп, зарядтау қосқышының тығыны тығыз жабылғанын тексеріңіз. Ирригаторды дымкыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртiңiз.

Саптамаларды мезгіл-мезгіл сабынмен және сумен жуыңыз. Саптамаларды тозған кезде ауыстырыңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, оны жаңа қосар алдында шайыңыз. Мұны істеу үшін резервуарға су құйып, саптаманы раковинаға бағыттап, ирригаторды қосыңыз.

Егер сіз қайнаған судың орнына арнайы ауыз шайғыштарын қолданаңыз, уақыт өте келе бұл резервуарда және ішкі беттерде шөгінділердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұған жол бермеу үшін құрылғыны осындай ерітінділерді қолданғаннан кейін дереу шайыңыз. Мұны істеу үшін резервуарға таза су құйыңыз және саптаманы раковинаға бағыттап отырып, орнатылған саптамасы бар ирригаторды қосыңыз.

Құрылғының корпусына, зарядтау ұясына, басқару элементтеріне және USB сымына су кірмеңіз.

Өктастан тазарту

Біраз уақыттан кейін ирригатордың ішінде әк және басқа шөгінділер жинала бастайды. Бұл судың қаттылығына байланысты. Тақта су ыдысында да, ішкі беттерде де жиналады. Бұл қозғалтқыштың жұмысын қиындатады және құрылғының қызмет ету мерзімін қысқартады. Әк сонымен қатар патогендер мен микроорганизмдердің көбеюі үшін пайдалы орта болып табылады. Ирригаторды тазартқыш құрылғының барлық беттерінен және жасырын элементтерінен налетті кетіруге көмектеседі. Мұндай құралдың нұсқауларына сәйкес әрекет етіңіз.

Сондай-ақ, 100 мл суға 3 г мөлшерінде лимон қышқылын қолдануға болады. Ирригатор ыдысына ерітілген лимон қышқылымен 270 мл су құйыңыз. Ирригаторды қысқа уақытқа қосыңыз, содан кейін оны 15–20 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін ирригаторды таза сумен бірнеше рет қосыңыз.

Күтім және сақтау

Ирригаторды балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Құрылғыны сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны және саптамаларды «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында сипатталғандай жуыңыз және құрғатыңыз. Саптамаларды жоғалтпау үшін су ыдысында сақтауға болады. Ұзақ мерзімді сақтау үшін ирригаторды, саптамаларды және USB сымын шаңнан қорғайтын қорапқа немесе пакетке салыңыз.

Құрылғыны 5-тен 40 °C-қа дейінгі температурада сақтаңыз. Егер ирригатор ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батарея сыйымдылығының төмендеуіне жол бермеу үшін оны әр 3 ай сайын жартылай зарядтаңыз. Құрылғыны жартылай зарядталған күйде сақтау ұсынылады. Мұны істеу үшін алдымен ирригаторды толығымен босатыңыз, содан кейін оны шамамен 2–3 сағат зарядтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Акумулятор заряды таусылды	Ирригаторды «Ирригаторды зарядтау» бөліміне сәйкес зарядтаңыз
Акумулятор өз ресурсын таусылды	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Ирригатор зарядталмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Ноутбук немесе компьютер қосылмаған	Құрылғыны компьютердің немесе ноутбуктің USB портынан зарядтау үшін оларды қосу керек
Қуат банкі немесе ноутбук таусылған немесе қосылмаған	Қуат банкін немесе ноутбукты зарядтаңыз және қосыңыз
Зақымдалған USB сымы	USB сымын жұмыс істейтін сымға ауыстырыңыз

Су саптаманың корпусқа қосылатын жерінен ағып кетеді

Мүмкін себеп	Шешім
Саптама бос орнатылған	Саптаманы тоқтағанша орнатыңыз

Резервуардан су ағып жатыр

Мүмкін себеп	Шешім
Су ыдысының қақпағы жабық емес немесе судың өтуіне мүмкіндік береді	Су ыдысының қақпағын жабыңыз немесе су ыдысының қақпағына орнатылған тығыздағыш сақинаны ауыстырыңыз
Резервуар дұрыс орнатылмаған	Резервуарды «Резервуарға суды қалай құю керек» бөлімінде сипатталғандай дұрыс орнатыңыз

Су кірмейді

Мүмкін себеп	Шешім
Саптама бітеліп қалды	Саптаманы жақсылап шайыңыз, оны құрылғыға салыңыз және колданар алдында резервуарды шайқаңыз
Налет құрылғының ішкі беттерінде жиналды	Ирригатор құралын «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз

Саптама алынбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Сіз саптаманы алу түймесін басападыңыз	Саптаманы алу түймесін басып саптаманы жоғары қарай тартыңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарактарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Тамақтану: ≈ 5 В, 1 А
2. Қуаты: 5 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: III
4. Батарея: Li-Ion 3,7 В, 1,8 А*сағ (6,66 Вт*сағ)
5. Реактивті пульсация жиілігі: 1100–1500 жж/мин
6. Су қысымы: 2,1–6,9 бар
7. Су ыдысының сыйымдылығы: 270 мл
8. Зарядтау уақыты: 4–6 сағ
9. Жұмыс режимдері: 5
10. Автоматты өшіру: 1,5 минуттан кейін
11. Ирригатордың жұмыс уақыты:
 - «Жұмсақ» режимде: 100 мин
 - «Ұқыпты» режимде: 90 мин
 - «Норма» режимінде: 85 мин
 - «Қатты» режимде: 80 мин
 - «Импульс» режимінде: 90 мин
12. USB сымының ұзындығы: 0,7 м
13. Құрылғының өлшемі: $58 \times 90 \times 305$ мм
14. Қаптама мөлшері: $102 \times 67 \times 256$ мм
15. Таза салмағы: 0,33 кг
16. Жалпы салмағы: 0,52 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Ханчжоу Викэнтайгер Атомобил Продактс Ко., Лтд. 6Ф Билдинг А, Пауэрлонг Сити Плаза, №3867 Биньшэн Роуд, Ханчжоу, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ.,

Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен

кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Су құбырларын, клапанды немесе резервуарды органикалық, тұзды немесе минералды шөгінділермен бітеу кепілдік емес. Шөгінділердің пайда болуын болдырмау үшін қайнатылған суды пайдалану және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілгендей жүйелі түрде тазалау қажет.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың корпустың ішіне, басқару органдарына, USB сымына және зарядтау қосқышына түсуіне байланысты құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаныз.

1. Жақында периодонтальды немесе стоматологиялық хирургиялық операциядан өткен адамдар, сондай-ақ ауыз қуысының проблемаларына байланысты емделушілер ирригаторды қолданар алдында емдеуші дәрігермен кеңесу керек.
2. Егер сізде екі апта бойы ирригаторы қолданғаннан кейін қызыл иектің қатты қан кетуі байқалса, дәрігерге қаралыңыз.
3. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
4. Ирригаторы тек мақсатына қарай және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
5. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
6. USB сымын ұстап, құрылғыны көтермеңіз. Қуат көзінен ажыратылған кезде USB сымын тартпаңыз.

7. Егер USB сымы немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
8. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
9. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
10. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
11. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз. Есіңізде болсын, қараусыз қалған құрылғы өрт көзі болуы мүмкін!
12. Қолданғаннан кейін қалған суды төгіп тастаңыз, су ыдысы мен саптаманы шайыңыз және құрғатыңыз.
13. Судың немесе ерітіндінің температурасы 40 °C-тан аспауы керек.
14. Ирригатордың құлап кетуіне жол бермеңіз және оны сокқыларға ұшыратпаңыз.
15. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
16. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
17. Егер USB сымы зақымдалған болса, оны өндірушіден немесе қызмет көрсетуден алынған арнайы сыммен немесе жинақпен ауыстыру керек.
18. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
19. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды құрылғы корпусының ішіне, зарядтау ұясына, басқару элементтеріне және USB сымы.
20. Құрылғыны жылу көздерінен, сондай-ақ от пен ұшқыннан алыс ұстаңыз.
21. Құрылғының айналасында зарядтау кезінде қажетті желдетуді қамтамасыз етіңіз.
22. Зарядталғаннан кейін USB сымын алдымен қуат көзінен, содан кейін құрылғыдан ажыратыңыз. Зарядталғаннан кейін әрқашан зарядтау қосқышын штепсельмен жабыңыз.





Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқанымға қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru