


**Лучший друг
твоей кожи!**

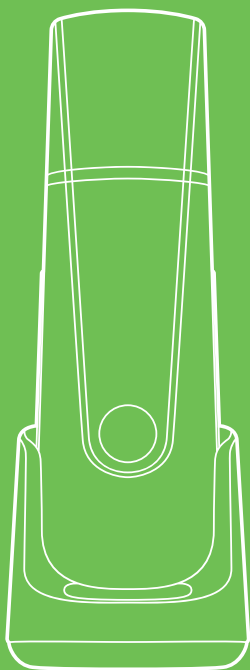

**Аппарат для ультразвуковой
чистки лица KT-3191**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Аппарат для ультразвуковой чистки лица KT-3191 предназначен для удаления омертвевших клеток кожи, избытка кожного сала и черных точек, способствует улучшению кровообращения и лимфодренажу. Использование прибора повышает эластичность кожи и увеличивает эффективность от применения питательных косметических средств. Ультразвуковая чистка также помогает сузить поры и выровнять цвет кожи.

Прибор воздействует на кожу с помощью ультразвуковых волн, благодаря чему минимизируется механическое воздействие на кожу, и, соответственно, нет нарушения целостности кожных покровов, уменьшается риск раздражения кожи. Ультразвуковая чистка является разновидностью пилинга, ее можно делать в любое время года, тогда как, например, у химического пилинга есть ограничения, связанные с гиперпигментацией в летнее время.

Ультразвуковую чистку лица обязательно проводят с использованием жидкой контактной среды, например, специальных гелей для ультразвуковой чистки. Когда ультразвуковая волна попадает в жидкую среду, происходит эффект кавитации: в жидкости создаются пузырьки, которые затем лопаются, благодаря чему загрязнения выбиваются с поверхности кожи.

Дополнительно у прибора есть функции воздействия на кожу положительными и отрицательными ионами, а также функция миостимуляции. Воздействие положительными ионами способствует глубокой очистке и повышению эластичности кожи. Воздействие отрицательными ионами улучшает эффективность питания кожи уходовыми средствами и гидробаланс. Миостимуляция (EMS) приводит в тонус мышцы лица, содействуя улучшению контура лица. Она также повышает эластичность и упругость кожи.

В устройстве также есть функция нагрева лопатки, что содействует открытию пор для их лучшего очищения. Нагрев также помогает улучшить эффективность проникновения питательных средств в глубь кожи. Температура нагрева: 42–45 °C.

Устройство работает в 6 режимах:

- очищение (очистка ультразвуком без / с положительно заряженными ионами);
- увлажнение (воздействие ультразвуком для питания кожи);
- лифтинг (очистка ультразвуком с функцией миостимуляции и воздействием отрицательно заряженными ионами);
- очищение + нагрев (очистка ультразвуком с положительно заряженными ионами и нагревом лопатки);
- увлажнение + нагрев (воздействие ультразвуком для питания кожи с нагревом лопатки);
- лифтинг + нагрев (очистка ультразвуком с функцией миостимуляции, воздействием отрицательно заряженными ионами и нагревом лопатки).

Нагрев способствует раскрытию пор и делает работу с прибором более приятной для кожи. Однако используйте прибор с нагревом не чаще 1–2 раза в неделю, так как нагрев увеличивает эффективность очистки, но при этом работа с прибором становится менее щадящей для кожи.

Регулярное использование аппарата для ультразвуковой чистки лица в совокупности с комплексным подходом к уходу за кожей позволяют улучшить состояние вашей кожи в домашних условиях. Однако помните, что эффект от использования аппарата заметен только при регулярном применении и с учетом соблюдения всех правил использования прибора и ухода за кожей.

В комплекте с устройством идет база для зарядки и шнур Micro-USB.

Внимание! Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.

Комплектация

1. Аппарат для ультразвуковой чистки лица — 1 шт.
 2. Крышка — 1 шт.
 3. База для зарядки — 1 шт.
 4. Шнур Micro-USB — 1 шт.
 5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 6. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство аппарата для ультразвуковой чистки лица



Включить, выключить прибор, а также выбрать режим работы аппарата для ультразвуковой чистки лица можно при помощи кнопки «Вкл/Выкл». Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Прибор перейдет в режим ожидания, индикаторы режимов будут быстро мигать.

Примечание. Если не нажимать на кнопку «Вкл/Выкл» в течение 1 минуты в режиме ожидания, аппарат автоматически выключится.

Режимы переключаются с помощью кнопки «Вкл/Выкл» следующим образом:

- первое нажатие — работа в режиме «Очищение», индикатор режима «Очищение» горит непрерывно, остальные индикаторы не горят;
- второе нажатие — работа в режиме «Увлажнение», индикатор режима «Увлажнение» горит непрерывно, остальные индикаторы не горят;
- третье нажатие — работа в режиме «Лифтинг», индикатор режима «Лифтинг» мигает, остальные индикаторы не горят;
- четвертое нажатие — работа в режиме «Очищение + нагрев», горят индикаторы режимов «Очищение» и «Нагрев», остальные индикаторы не горят;

- пятое нажатие — работа в режиме «Увлажнение + нагрев», горят индикаторы режимов «Увлажнение» и «Нагрев», остальные индикаторы не горят;
- шестое нажатие — работа в режиме «Лифтинг + нагрев», мигают индикаторы режимов «Лифтинг» и «Нагрев», остальные индикаторы не горят;
- седьмое нажатие переводит прибор в режим ожидания.

Для выключения устройства удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Индикаторы погаснут.

Нажатие на кнопку сопровождается звуковыми сигналами.

По бокам прибора находятся **контактные пластины**, на которые необходимо нажимать во всех режимах, кроме режима «Очищение», где для более мягкого воздействия на кожу вы можете не нажимать на пластины. Во время нажатия на пластины прибор воздействует на кожу положительными, отрицательными ионами или электроимпульсами в зависимости от выбранного режима.

Примечание. Достаточно просто дотронуться до пластин, давить на них не нужно.

Прибор заряжается бесконтактным способом при установке на **базу для зарядки**. База для зарядки подключается к источнику питания с помощью **шнура Micro-USB** из комплекта.

Если прибор разряжен, индикаторы режимов будут быстро мигать, прибор подаст звуковой сигнал и автоматически выключится. Во время зарядки индикаторы режимов медленно мигают, когда прибор заряжен, индикатор режима «Увлажнение» горит непрерывно.

Прибор автоматически отключается через 10 минут непрерывной работы.

Режимы работы

Режим «Очищение» (очистка ультразвуком без / с положительно заряженными ионами) способствует:

- удалению загрязнений с поверхности кожи;
- удалению омертвевших клеток кожи;
- устранению мелких комедонов и загрязнений из пор;
- удалению избытка кожного сала;
- улучшению тона кожи;
- выравниванию кожного рельефа.

В режиме «Очищение» прибор может работать как с положительно заряженными ионами, так и без. Чтобы на кожу воздействовали положительно заряженные ионы, во время работы с прибором удерживайте контактные пластины по бокам прибора. Использовать прибор в режиме «Очищение» без положительно заряженных ионов (не удерживая контактные пластины) вы можете 2–3 раза в неделю, так как такая работа прибора является более щадящей для кожи, но менее эффективной. Использовать прибор с положительно заряженными ионами рекомендуется не чаще одного раза в неделю.

Примечание. Прибор неэффективен для удаления больших и закрытых комедонов.

Режим «Увлажнение» (воздействие ультразвуком для питания кожи) способствует:

- повышению эффективности уходовой косметики;
- улучшению гидробаланса кожи;
- улучшению тона кожи.

В режиме «Увлажнение» прибор воздействует на кожу ультразвуковыми волнами, которые способствуют лучшему проникновению питательных веществ в глубь кожи. При работе нажимайте на контактные пластины. Используйте данный режим 1–2 раза в неделю.

Режим «Лифтинг» (очистка ультразвуком с функцией мио-стимуляции и воздействием отрицательно заряженными ионами) способствует:

- повышению тонуса и упругости кожи;
- повышению тонуса мышц лица;
- улучшению тона кожи;
- уменьшению отечности.

В режиме «Лифтинг» прибор воздействует на кожу электроимпульсами, что обеспечивает лифтинг-эффект и стимулирует обменные процессы в клетках кожи. Отрицательно заряженные ионы способствуют эффективному питанию кожи уходовыми средствами. Используйте данный режим 1 раз в неделю. При работе нажимайте на контактные пластины.

Режимы «Очищение + нагрев», «Увлажнение + нагрев», «Лифтинг + нагрев» выполняют те же функции, что 1, 2 и 3 режимы, но при этом происходит нагрев лопатки. Нагрев способствует раскрытию пор и делает работу с прибором более приятной для кожи. Однако используйте прибор с нагревом не чаще 1–2 раз в неделю, так как нагрев увеличивает эффективность очистки, но при этом работа с прибором становится менее щадящей для кожи. Температура нагрева: 42–45 °С. При работе нажимайте на контактные пластины.

Внимание! Вне зависимости от режима не используйте прибор чаще 2–3 раз в неделю.

Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальное средство для ультразвуковой очистки, гель или сыворотку.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, снимайте украшения перед использованием аппарата.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать, как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур после или до ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и аксессуары из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью. Тщательно продезинфицируйте лопатку: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», контактные пластины, базу для зарядки, в разъем для шнура Micro-USB на базе и на шнур Micro-USB. Перед использованием зарядите аккумулятор устройства.

Зарядка аккумулятора

Для подключения базы для зарядки к источнику питания подходит шнур Micro-USB из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур Micro-USB, если он рассчитан на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1 А.

Аппарат заряжается беспроводным способом от базы для зарядки. Установите прибор на базу крышкой вверх. Затем вставьте шнур Micro-USB в разъем на базе и подключите его к источнику питания. Перед зарядкой всегда выключайте прибор, нажав и удерживая в течение 2 секунд кнопку «Вкл/Выкл».

Если прибор разряжен, индикаторы режимов будут быстро мигать, прибор подаст звуковые сигналы и автоматически выключится. Во время зарядки индикаторы режимов медленно мигают, когда прибор заряжен, индикатор режима «Увлажнение» горит непрерывно.

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3–5 часов. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор включить нельзя. Чтобы включить прибор, снимите его с базы для зарядки.

По окончании зарядки отсоедините шнур Micro-USB от источника питания, а затем от базы для зарядки.

От одной зарядки прибор работает 80 мин.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если аппарат не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите прибор, затем заряжайте примерно 1,5–2,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности и при наличии имплантов. Не используйте прибор на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, снимайте украшения перед использованием аппарата.

Внимание! Держите устройство только сухими руками. Не допускайте попадания влаги и косметических средств в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», контактные пластины, базу для зарядки, на шнур Micro-USB и в разъем для шнура Micro-USB на базе.

Не рекомендуется использовать прибор в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.

2. Перед началом процедуры обязательно очистите кожу и снимите макияж.
3. Для эффективного проведения процедуры рекомендуется размягчить кожу, используя гель для холодного гидрирования. Гель наносится плотным слоем на лицо, затем участки лица с гелем закрываются пленкой. Сколько времени держать гель на лице, уточняйте в рекомендациях к используемому средству. Не наносите гель и не закрывайте пленкой глаза и зону вокруг глаз, губы и ноздри.
4. Снимите пленку и смойте гель с лица.
5. Нанесите на кожу специальное средство для проведения ультразвуковой чистки (приобретается отдельно). Если планируете работать с прибором в режиме «Увлажнение» и «Лифтинг» (в том числе при включении нагрева лопатки), нанесите на кожу питательный крем или другое уходовое средство для питания кожи. Не используйте прибор на сухой коже!

Примечание. Если используемое косметическое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено. Используйте менее густое средство.

6. Снимите крышку с устройства.
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Прибор перейдет в режим ожидания, будут быстро мигать индикаторы всех режимов. Выберите желаемый режим работы с помощью кнопки «Вкл/Выкл».


Внимание! Если средство, по которому вы проводите процедуру, впиталось или высохло во время проведения процедуры, снова нанесите его на лицо. Не проводите чистку на сухой коже!

Не используйте прибор в зоне вокруг глаз.

Используйте прибор только один раз в день и только в одном режиме. Не используйте прибор два дня подряд.


Примечание. Если не нажимать на кнопку «Вкл/Выкл» в течение 1 минуты в режиме ожидания, аппарат автоматически выключится.

8. Для проведения регулярной очистки (2–3 раза в неделю) выберите режим «Очищение», при этом не касайтесь контактных пластин. Для проведения глубокой очистки (не чаще одного раза в неделю) во время работы прикасайтесь к контактным пластинам, прибор будет воздействовать на кожу положительно заряженными ионами. Располагайте лопатку лицевой стороной к коже. Лицевая сторона лопатки — это противоположная сторона от кнопки. Прислоните лопатку к коже и проводите ей по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась вперед, а не назад. Держите прибор под углом 45°. Рекомендуемое время проведения процедуры 3 минуты.

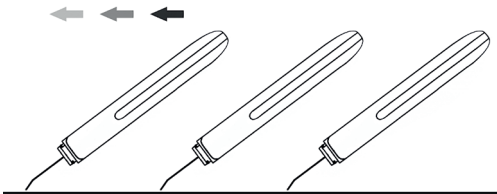


Внимание! Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. При проведении ультразвуковой чистки нет необходимости сильно надавливать на кожу лопаткой, так как очищение происходит за счет ультразвуковых волн.

9. Один или два раза в неделю вы можете работать с прибором в режиме «Увлажнение». При проведении процедуры держите пальцы на контактных пластинах. Для работы в данном режиме используйте питательную сыворотку или другое уходовое питательное средство. При работе располагайте лопатку лицевой стороной от кожи, чтобы к лицу прикасалась плоская часть лопатки. Проводите лопаткой по массажным линиям так, чтобы лопатка двигалась назад, а не вперед. Держите прибор под углом в 45°. Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. Рекомендуемое время проведения процедуры 3 минуты.

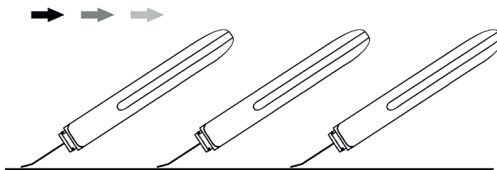

10. Если вы хотите провести процедуру лифтинга, включите режим «Лифтинг». Для работы в данном режиме используйте крем или сыворотку. При проведении процедуры держите пальцы на контактных пластинах. Располагайте лопатку лицевой стороной от кожи, чтобы к лицу прикасалась плоская часть лопатки. Проводите лопаткой по массажным линиям снизу вверх так, чтобы лопатка двигалась назад, а не вперед. Держите прибор под углом в 45°. Не давите на прибор сильно, чтобы не повредить кожу. Рекомендуемое время проведения процедуры 3 минуты. Работайте с прибором в режиме «Лифтинг» не чаще одного раза в неделю.

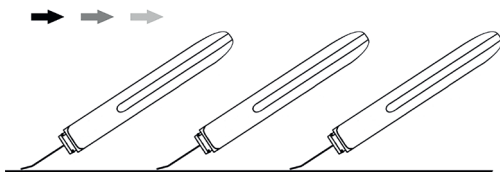

11. Вы также можете включить каждый из режимов вместе с нагревом лопатки. Для этого выберите один из трех режимов: «Очищение + нагрев», «Увлажнение + нагрев» или «Лифтинг + нагрев». Используйте прибор с нагревом не чаще 1–2 раз в неделю. Работайте с прибором, как описано в пунктах 8, 9 или 10 в зависимости от выбранного режима. Температура нагрева: 42–45 °С. При работе нажимайте на контактные пластины.
12. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд.
Примечание. Прибор автоматически отключается через 10 минут работы.
13. После проведения ультразвуковой чистки смойте с лица остатки средства для ультразвуковой чистки и загрязнения, которые могли остаться на поверхности кожи. После проведения процедур с аппаратом рекомендуется не наносить декоративную косметику в течение 8 часов.
14. После каждого использования тщательно очищайте и дезинфицируйте лопатку: ее можно протереть сначала влажной тканью, а затем ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине. Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», контактные пластины, базу для зарядки, в разъем для шнура Micro-USB на базе и на шнур Micro-USB.
15. Когда лопатка высохнет, закройте ее крышкой.

Внимание! Во время проведения процедур обязательно очищайте лопатку от загрязнений чистой мягкой тканью или ватным диском.

Не используйте прибор чаще, чем 2–3 раза в неделю. В главе «Подготовка к работе и использование» приведены рекомендации по частоте использования прибора в каждом режиме, однако, если вы уже, например, 2 раза работали с прибором в режиме «Очищение», то используйте прибор еще не больше 1 раза (вне зависимости от режима). Не проводите процедуры с аппаратом два дня подряд, делайте между процедурами перерывы. Проводите только одну процедуру в день.

В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора и времени проведения процедур. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать, как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур после или до ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.

Не давите слишком сильно на кожу во время использования аппарата. При дискомфорте во время работы с прибором прекратите процедуру и обратитесь к врачу. Не используйте аппарат после проведения других видов аппаратных процедур, а также после механических или химических пилингов.

Возможно временное покраснение кожи после использования прибора. Если краснота не прошла в течение 15–20 минут или появилась отечность, обратитесь к врачу. Если у вас хрупкие сосуды, перед использованием аппарата проконсультируйтесь с врачом.

Будьте внимательны при выборе косметических средств, чтобы избежать аллергических реакций. При необходимости проконсультируйтесь с врачом, какие средства для работы с прибором вам можно использовать.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Подросткам и детям можно пользоваться прибором только после разрешения врача и под присмотром взрослых.
4. Существуют противопоказания к применению, такие как:
 - беременность;
 - онкология;
 - наличие заболеваний кожи, в том числе инфекционных;
 - кожа, склонная к аллергическим реакциям;
 - наличие имплантов;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - тяжелая форма акне;
 - наличие большого количества родинок на лице;
 - воспаления на коже лица;
 - купероз 3–4 степени;
 - парез лицевого нерва;
 - невралгия тройничного нерва;
 - варикозное расширение вен, тромбофлебит;
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств при заболевании сердца, например, кардиостимулятора;
 - хроническая мигрень;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - почечная недостаточность;
 - повышенная температура, грипп, ОРВИ;
 - сахарный диабет;
 - менструация;
 - наличие каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительность к теплу;
 - гипогликемия;
 - гипертония;
 - слабость, нервозность и страх боли;
 - переутомление.

Чистка и обслуживание

Перед проведением очистки выключайте прибор и отключайте базу от источника питания. Протирайте устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Тщательно дезинфицируйте лопатку до и после использования: ее можно протереть ватным диском, смоченным в 70% растворе спирта или хлоргексидине.

Не допускайте попадания воды в корпус устройства, на кнопку «Вкл/Выкл», контактные пластины, базу для зарядки, в разъем для шнура Micro-USB на базе и на шнур Micro-USB. Не используйте для чистки прибора абразивные моющие средства и жесткие губки.

Уход и хранение

Храните аппарат для ультразвуковой чистки лица в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать на хранение, очистите прибор, как указано в главе «Чистка и обслуживание». Храните прибор с закрытой крышкой, чтобы не повредить лопатку. На длительное хранение убирайте устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор прибора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем зарядьте его примерно 1,5–2,5 часа.

При длительном хранении заряжайте аппарат наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня. Храните прибор при температуре от 0 до 40 °С.

Устранение неполадок

Аппарат для ультразвуковой чистки не включается, индикаторы не горят

Возможная причина	Решение
Аккумулятор устройства разряжен	Зарядите устройство

Устройство не заряжается

Возможная причина	Решение
Вы не до конца подключили шнур Micro-USB в разъем для зарядки на базе	Вставьте шнур Micro-USB до конца
Слабый ток источника питания	Используйте источник питания с параметрами: ~ 5 В, 1 А
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур Micro-USB	Используйте другой шнур Micro-USB, рассчитанный на ток 1 А
Вы установили прибор на базу, но не подключили базу к источнику питания	Для беспроводной зарядки прибора от базы нужно подключить базу к источнику питания с помощью шнура Micro-USB

Аппарат для ультразвуковой чистки перестал работать

Возможная причина	Решение
Прибор находился в режиме ожидания больше 1 минуты и отключился	Включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»
По истечении 10 минут использования сработало автоотключение устройства	Включите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»

Не замечен эффект от проведения процедуры

Возможная причина	Решение
От 1–2 процедур эффект будет незаметен	Это нормально и не является неисправностью прибора. Эффект от процедуры ультразвуковой чистки лица будет замечен только после нескольких использований и при условии, если все этапы очистки, размягчения кожи и последующего ухода за кожей лица были выполнены

Неприятные ощущения во время процедуры

Возможная причина	Решение
Вы проводите процедуру по сухой коже	Не используйте прибор на сухой коже! Всегда наносите средство для ультразвуковой чистки или крем/сыворотку. Если используемое средство слишком густое, прибор может работать менее эффективно и движение лопатки по коже будет затруднено. Используйте менее густое средство

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ~ 5 В, 1 А
2. Мощность: 4 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,65 А*ч (2,405 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 25000 Гц
6. Уровень шума: ≤ 40 дБ
7. Время зарядки: 3–5 ч
8. Время работы при полном заряде: 80 мин
9. Количество режимов работы: 6
10. Автоотключение: через 10 мин
11. Длина шнура Micro-USB: 0,5 м
12. Размер устройства: 50 × 17 × 168 мм
13. Размер устройства на базе: 62 × 58 × 173 мм
14. Размер упаковки: 95 × 205 × 65 мм
15. Вес нетто: 0,15 кг
16. Вес брутто: 0,33 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд.
4 Флор, Хуаньянь Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды, косметических средств, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на базу, в область разъема для шнура Micro-USB на базе, на кнопку «Вкл/Выкл», контактные пластины и шнур Micro-USB не считается гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте аппарат для ультразвуковой чистки лица только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте и не заряжайте устройство, если прибор, шнур Micro-USB или база повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться аппаратом для ультразвуковой чистки лица только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу аппарата для ультразвуковой чистки лица, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий аппарат для ультразвуковой чистки лица без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Держите прибор только сухими руками.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в базу для зарядки, в область разъема для шнура Micro-USB, на шнур Micro-USB, на кнопку «Вкл/Выкл» и контактные пластины.
15. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Никогда не используйте прибор на сухой коже! Перед использованием наносите на кожу специальное средство для ультразвуковой чистки.
17. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев,

в том числе при беременности и при наличии имплантов, прибором пользоваться запрещено.

18. Не используйте прибор в зоне вокруг глаз, а также на участках кожи с воспалениями или акне. Тяжелая форма акне является противопоказанием к использованию прибора. При использовании прибора не проводите лопаткой по родинкам! Не используйте прибор на шее, ультразвуковые волны могут нанести вред щитовидной железе. Не используйте прибор на других частях тела. Если у вас есть пирсинг на лице, снимайте украшения перед использованием аппарата.
19. В данной инструкции представлены усредненные рекомендации по частоте использования прибора. Настоятельно рекомендуется перед использованием прибора проконсультироваться с косметологом или дерматологом, чтобы узнать как часто необходимо проводить процедуры с аппаратом для ультразвуковой чистки кожи в вашем случае. Возможность проведения других косметологических процедур после или до ультразвуковой чистки также согласовывайте с врачом.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
22. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
23. Обеспечьте необходимую вентиляцию вокруг устройства при зарядке.
24. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от базы для зарядки.

ИМ-3



Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru