

**Удовольствие
в заботе!**



**Массажер для шеи
KT-5935**

RUS



KZ



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке

RUS

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство массажера для шеи	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности	13

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы

KZ

Жалпы мәліметтер	16
Жинақтау	16
Мойын массажер құрылғысы	17
Жұмысқа дайындық және пайдалану	18
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	21
Күтім және сақтау	21
Ақаулықтарды жою	22
Техникалық сипаттамалары	23
Сақтық шаралары	25

Общие сведения

Массажер для шеи КТ-5935 выполняет массаж, помогая избавиться от дискомфорта в шейно-воротниковой зоне, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или при сидячем образе жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраняет стресс и затекание мышц.

Также массажер можно использовать для массажа других зон: поясницы, живота, бедер и стоп.

Благодаря нагреву эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет тем, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют, снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови. Массажер имеет два уровня интенсивности массажа: низкий и высокий.

Управление массажером осуществляется с помощью четырех кнопок.

Рекомендуемая продолжительность сеанса массажа составляет 10 минут. Через 10 минут массажер автоматически отключается. Не используйте массажер на одной зоне более одного раза подряд и более двух раз в день.


При беременности, наличии противопоказаний или заболеваний необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер КТ-5935 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Также массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер с тканевым чехлом для массажных роликов — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи

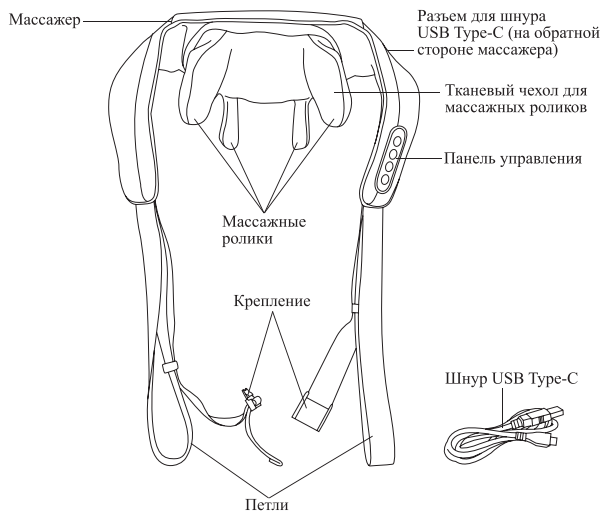

Панель управления

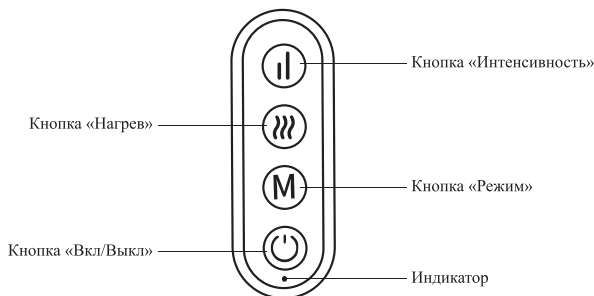

Индикатор отображает уровень заряда массажера. Если индикатор мигает красным, массажер разряжен и устройство скоро отключится. Во время зарядки индикатор мигает красным, а когда устройство заряжено, он горит непрерывно зеленым. Также данный индикатор показывает, включена или отключена функция «Нагрев». Когда нагрев включен, индикатор горит красным, когда отключен — зеленым.

Нажатие и удерживание **кнопки «Вкл/Выкл»** в течение 2 секунд включает и отключает массажер.

Кнопка «Режим» переключает два режима массажа: режим бодрящего массажа и режим расслабляющего массажа, при котором массажные ролики движутся медленнее.

Примечание. По умолчанию включен режим бодрящего массажа.

Кнопка «Нагрев» включает и выключает функцию нагрева.

Кнопка «Интенсивность» позволяет циклически переключать два уровня интенсивности массажа: от низкого до высокого.

Примечание. По умолчанию включены нагрев и низкий уровень интенсивности.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите массажер мягкой слегка влажной тканью.

Зарядите устройство. Перед первым применением ознакомьтесь со всеми рекомендациями и противопоказаниями к применению массажера в разделе «Меры предосторожности по применению».

Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движений.

Зарядка аккумулятора

Если индикатор мигает красным, массажер необходимо зарядить. Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 2 А.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами ≈ 5 В, 2 А. Зарядить устройство можно и от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор мигает красным. Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор будет гореть зеленым. Время зарядки аккумулятора составляет 3,5–4 часа. Рекомендуется заряжать устройство при полной разрядке аккумулятора. Во время зарядки нельзя пользоваться устройством.


Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого разрядите массажер, затем заряжайте его в течение 2 часов.

Использование

1. Наденьте массажер на шейно-воротниковую зону так, чтобы панель управления оказалась слева. Зафиксируйте массажер на спине с помощью крепления. Примите удобное положение, шея не должна быть напряжена. Руки просуньте в петли массажера.

Внимание! Использовать массажер на шее в положении лежа запрещено.

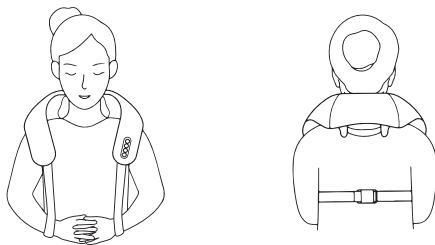

Примечание. Вы можете использовать массажер для выполнения массажа передней и задней поверхности бедра, поясницы, стоп, живота.

2. Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд. Массажер начнет работу. По умолчанию включен режим бодрящего массажа: включен нагрев, интенсивность массажа низкая.
3. Чтобы отключить нагрев, нажмите на кнопку «Нагрев». Индикатор будет гореть зеленым.
4. Если вы хотите включить режим расслабляющего массажа, нажмите на кнопку «Режим».
5. Нажмите на кнопку «Интенсивность», чтобы изменить уровень интенсивности массажа на высокий.
6. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 10 минут. По истечении 10 минут массажер автоматически отключается. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» 2 секунды, пока массажер не отключится.
7. По окончании массажа нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, массажер выключится. Протрите массажер мягкой, слегка влажной тканью.

Примечание. При возникновении неприятных ощущений прекратите массаж и проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте массажер 2 раза подряд для одной и той же зоны.

Меры предосторожности по применению

1. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.
2. Массажер не является медицинским изделием и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - наличие ран или каких-либо заболеваний в острой форме;
 - нечувствительность к теплу;
 - инфекционные заболевания кожи;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например, кардиостимулятора;
 - злокачественные новообразования;
 - повреждение целостности кожного покрова в зоне массажа;
 - переломы, вывихи, разрывы мышц и прочие повреждения;
 - недавняя операция, ввод инъекций;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - сахарный диабет;

- беременность;
- переутомление;
- возраст младше 16 лет.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо. Не используйте моющие средства. Для дезинфекции массажера допускается протереть его ватным диском, смоченным в 75%-ном растворе спирта. Также вы можете снять тканевый чехол массажера и постирать его.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C. Если массажер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите массажер, индикатор заряда будет мигать красным, затем заряжайте около 2 часов.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор, индикатор мигает красным	Зарядите массажер, как указано в разделе «Зарядка аккумулятора»
Вы нажимаете на кнопку «Вкл/Выкл», а не удерживаете ее в течение 2 секунд	Чтобы включить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд

Устройство выключилось во время работы

Возможная причина	Решение
Сработало автоматическое отключение после 10 минут массажа	Если вы хотите воспользоваться массажером снова, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» в течение 2 секунд, чтобы включить его
Сработала защита от перегрева	Подождите около 30 минут, затем попробуйте включить устройство снова
Разряжен аккумулятор, индикатор мигает красным	Зарядите массажер, как указано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Интенсивность массажа очень слабая

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор, индикатор мигает красным	Зарядите массажер, как указано в разделе «Зарядка аккумулятора»

Устройство не заряжается, индикатор не мигает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Поврежден шнур USB Type-C	Замените шнур USB Type-C на исправный

Возможная причина	Решение
Ноутбук или компьютер или пауэрбанк не включены	Для зарядки устройства от USB-порта компьютера, пауэрбанка или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен	Зарядите пауэрбанк

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 2 А
2. Мощность: 10 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 7,4 В, 2 А*ч (14,8 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Тип массажера: роликовый
6. Автоотключение: через 10 мин
7. Время зарядки: 3,5–4 ч
8. Время работы: 75 мин
9. Длина шнура USB Type-C: 1 м
10. Размер устройства: 1320 × 168 × 173 мм
11. Размер упаковки: 250 × 175 × 170 мм
12. Вес нетто: 1,2 кг
13. Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Нинбо Ююэ Хэлс Тэк Ко., Лтд. Рум 711, №282, №288 Чэнбо Стрит, №668 Лиюань Норс Роуд, Хайшу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур USB Type-C или разъем для шнура питания. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для шнура USB Type-C и на шнур USB Type-C.
14. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром USB Type-C или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
15. Держите устройство вдали от источников тепла и огня.
16. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

**Қамқорлық
рахат!**

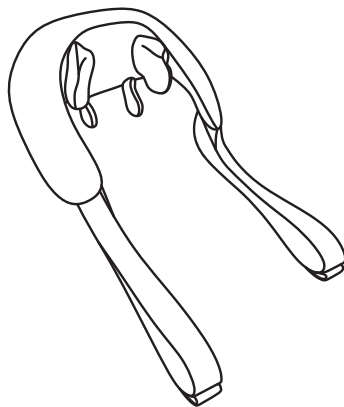

КТ-5935
мойын
массажеры

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-5935 мойын массажеры компьютерде ұзақ отырғаннан кейін, ұйықтау кезінде немесе отырықшы өмір салтында ыңғайсыз қалыптан кейін пайда болуы мүмкін мойын-мойын аймағындағы ыңғайсыздықты жоюға көмектесетін массаж жасайды. Массаж роликтерімен мойынға, омыртқаға және иыққа әсер ете отырып, массажер стресс пен бұлшықет ағынын жояды.

Массажерды басқа аймақтарды: белді, ішті, жамбасты және аяқты укалау үшін де қолдануға болады.

Жылудың арқасында массаждың тиімділігі артады және мойын бұлшықеттерінің жақсы релаксациясына қол жеткізіледі. Мұндай массажер компьютерде ұзақ уақыт жұмыс істейтін немесе мойын аймағында жиі ыңғайсыздық пен шаршауды сезінетіндер үшін өте қолайлы. Роликті массаж және жылу мойын бұлшықеттерінің тонусын ынталандырады және арттырады, шаршауды, шиеленісті және ауырсынуды босаңсытады және жеңілдетеді, сонымен қатар қан айналымын жақсартады. Сондай-ақ, массажердің массаж қарқындылығының екі деңгейі бар: төмен және жоғары.

Массажерді басқару төрт батырманың көмегімен жүзеге асырылады.



Массаж сеансының ұсынылатын ұзақтығы — 10 минут. 10 минуттан кейін массажер автоматты түрде өшеді. Массажды бір аймақта қатарынан бір реттен артық және күніне екі реттен артық қолданбаңыз.

Жүктілік кезінде, қарсы көрсетілімдер немесе аурулар болған кезде емдеуші дәрігермен кеңесу керек. КТ-5935 массажері медициналық құрал емес және тек профилактикалық мақсатта қолданылады. Сондай-ақ, массажерді жаралар, сызаттар немесе аллергиялық бөртпелер сияқты терінің зақымдануы болмаған жағдайда ғана қолдануға болады.

Жинақтау

1. Массаж роликтеріне арналған мата жамылғысы бар массажер — 1 дана
2. USB Type-C сымы — 1 дана
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

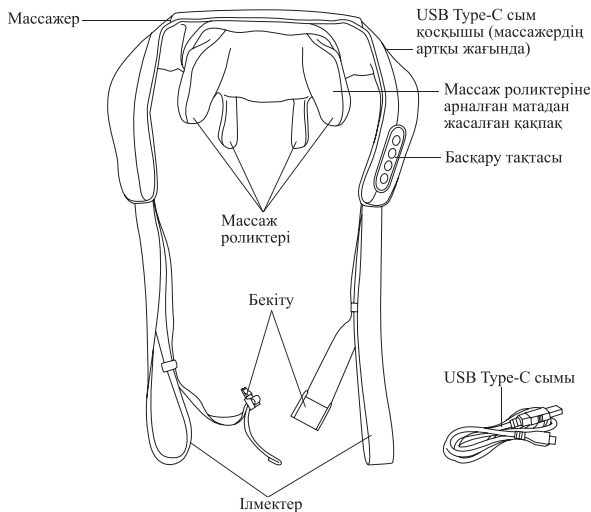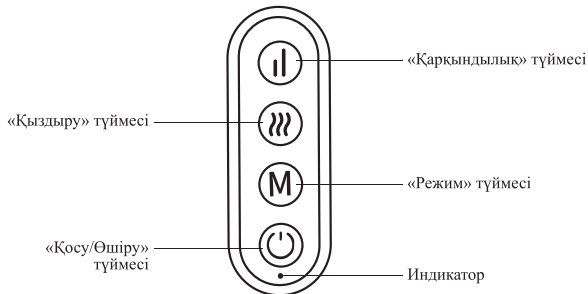Мойын массажер құрылғысы**Басқару тақтасы**

Индикатор массажердің заряд деңгейін көрсетеді. Егер шам қызыл болып жыпылықтаса, массажер таусылып, құрылғы жақын арада өшеді. Зарядтау кезінде шам қызыл болып жыпылықтайды, ал құрылғы зарядталған кезде ол үздіксіз жасыл болып жанады. Сондай-ақ, бұл индикатор «Қыздыру» функциясының қосылғанын немесе өшірілгенін көрсетеді. Қыздыру қосулы кезде индикатор өшірілген кезде қызыл-жасыл болып жанады.

«Қосу/Өшіру» түймесін 2 секунд басып тұру массажерді қосады және өшіреді.

«Режим» түймесі екі массаж режимін ауыстырады: қуаттандыратын массаж режимі және массаж роликтері баяу қозғалатын босаңсытатын массаж режимі.

Ескерту. Әдепкі бойынша, қуаттандыратын массаж режимі қосылады.

«Қыздыру» түймесі қыздыру функциясын қосады және өшіреді.

«Қарқындылық» түймесі массаж қарқындылығының екі деңгейін төменнен жоғарыға дейін айналдыруға мүмкіндік береді.

Ескерту. Жылыту және төмен қарқындылық әдепкі бойынша қосылады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Массажерді алыңыз және барлық орау материалдарын алыңыз. Массажерді бірінші рет қолданар алдында жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғыны зарядтаңыз. Бірінші қолданар алдында «Қолдану бойынша сақтық шаралары» бөлімінен массажерді қолдануға арналған барлық ұсыныстармен және қарсы көрсетілімдермен танысыңыз.

Массаж жасамас бұрын терінің таза екеніне көз жеткізіңіз. Егер сізде ұзын шаш болса, оны кедергі жасамайтындай етіп жинаңыз. Массаж аймағында бөгде заттар болмауы керек: зергерлік бұйымдар, найзағай, тігістер немесе киімнің сәндік элементтері. Киім ыңғайлы және қозғалысты шектемеуі керек.

Батареяны зарядтау

Егер шам қызыл болып жыпылықтаса, массажерді зарядтау керек. Зарядтау үшін жинактан USB Type-C сымы қолайлы. Сіз 2 А токқа арналған басқа толық емес USB Type-C сымын пайдалана аласыз. Құрылғыны зарядтау үшін USB коннекторы мен шығыс параметрлері —5 В, 2 А болатын қуат көзін пайдалану ұсынылады. Құрылғыны үшінші тараптың қуат көздерінен де зарядтауға болады: ноутбук, қуат банкі және т. б.

Батарея зарядталған кезде шам қызыл болып жыпылықтайды. Батарея толығымен зарядталған кезде индикатор жасыл болып жанады. Батареяны зарядтау уақыты 3,5–4 сағатты құрайды. Батарея толығымен таусылған кезде құрылғыны зарядтау ұсынылады. Зарядтау кезінде құрылғыны пайдалануға болмайды.


Батареяны зарядтау 5-тен 40 °C-қа дейінгі температурада жүргізілуі керек, батареяны теріс температурада зарядтамаңыз және оны 45 °C-тан жоғары қыздырмаңыз.

Құрылғыны 5-тен 40 °C-қа дейінгі температурада сақтаңыз. Егер массажер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батарея сыйымдылығының төмендеуіне жол бермеу үшін оны 3–6 ай сайын зарядтаңыз. Құрылғыны жартылай зарядталған күйде сақтау ұсынылады. Мұны істеу үшін массажерді босатыңыз, содан кейін оны 2 сағат бойы зарядтаңыз.

Пайдалану

1. Басқару тактасы сол жақта болатындай етіп массажерді мойын аймағына сырғытыңыз. Массажды артқы жағына бекіту арқылы бекітіңіз. Ыңғайлы позицияны қабылдаңыз, мойын шиеленіспеуі керек. Қолыңызды массажердің ілмектеріне салыңыз.

Назар аударыңыз! Мойын массажерін жатып қолдануға тыйым салынады.

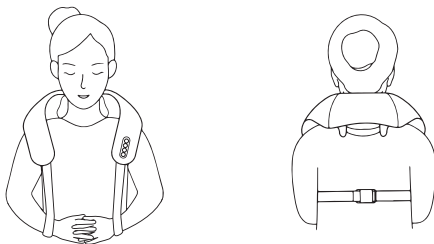

Ескерту. Массажды жамбастың, белдің, аяқтың, іштің алдыңғы және артқы бетіне массаж жасау үшін қолдануға болады.

2. Массажерді қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін 2 секунд басып тұрыңыз. Массажер жұмысын бастайды. Әдепкі бойынша, қуаттандыратын массаж режимі қосылады: қыздыру қосылады, массаждың қарқындылығы төмен.
3. Жылуды өшіру үшін «Қыздыру» түймесін басыңыз. Индикатор жасыл болып жанады.
4. Егер сіз босаңсытатын массаж режимін қосқыңыз келсе, «Режим» түймесін басыңыз.
5. Массаждың қарқындылық деңгейін жоғары деңгейге өзгерту үшін «Қарқындылық» түймесін басыңыз.
6. Массаж сеансының ұсынылатын ұзақтығы — 10 минут. 10 минуттан кейін массажер автоматты түрде өшеді. Егер сіз массажерді ертерек өшіргіңіз келсе, «Қосу/Өшіру» түймесін массажер сөнгенше 2 секунд басып тұрыңыз.
7. Массаж аяқталғаннан кейін «Қосу/Өшіру» түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, массажер өшеді. Массажерді жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Ескерту. Егер ыңғайсыздық пайда болса, массажды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз. Сондай-ақ, массажерді бір аймақ үшін қатарынан 2 рет қолданбаңыз.

Қолдану бойынша сақтық шаралары

1. Қолданар алдында дәрігермен кенескен жөн.
2. Массажер медициналық құрал емес және тек профилактикалық мақсатта қолданылады.
3. Қолдануға бірқатар қарсы көрсеткіштер бар:
 - жедел түрде жаралардың немесе қандай да бір аурулардың болуы;
 - ыстыққа сезімталдық;
 - жұқпалы тері аурулары;
 - остеопороз;
 - кардиостимулятор сияқты электронды құрылғылардың болуы;
 - катерлі ісіктер;
 - массаж аймағындағы терінің тұтастығының зақымдануы;
 - сынықтар, дислокациялар, бұлшықеттердің жыртылуы және басқа да зақымданулар;

- соңғы операция, инъекция;
- тұмау, ЖРВИ, жоғары температура;
- қант диабеті;
- жүктілік;
- шамадан тыс жұмыс;
- 16 жасқа толмаған.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Массажерді әр қолданғаннан кейін және қажет болған жағдайда қолданар алдында сәл дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жуғыш заттарды қолданбаңыз. Массажерді дезинфекциялау үшін оны спирттің 75% ерітіндісіне малынған макта шарымен сүртуге рұқсат етіледі. Сондай-ақ, массажердің матадан жасалған қақпағын алып тастап, оны жууға болады.

Құрылғыны суға батырмаңыз. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды массажердің ішіне, басқару тақтасына, USB Type-C сымының ұясына және USB Type-C сымына кіргізбеңіз.

Күтім және сақтау

Массажерді сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны тазалау және техникалық қызмет көрсету тарауында сипатталғандай тазалаңыз және шаңнан қорғау үшін қорапқа немесе сөмкеге салыңыз. Массажерді балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Құрылғыны тікелей күн сәулесінде немесе температурасы жоғары жерде сақтамаңыз.

Егер массажер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, батарея сыйымдылығының төмендеуіне жол бермеу үшін оны 3–6 ай сайын зарядтаңыз. Құрылғыны жартылай зарядталған күйде сақтау ұсынылады. Мұны істеу үшін алдымен массажерді толығымен босатыңыз, зарядтау шамы қызыл болып жыпылықтайды, содан кейін шамамен 2 сағат зарядтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды

Мүмкін себеп	Шешім
Батарея заряды таусылды, шам қызыл болып жыпылықтайды	Массажерді «Батареяны зарядтау» тарауында көрсетілгендей зарядтаңыз
Сіз оны 2 секунд ұстап тұрудың орнына «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз	Массажерді қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін 2 секунд басып тұрыңыз

Жұмыс кезінде құрылғы өшіп қалды

Мүмкін себеп	Шешім
10 минуттық массаждан кейін автоматты түрде өшіру жұмыс істеді	Егер сіз массажерді қайтадан қолданғыңыз келсе, оны қосу үшін «Қосу/Өшіру» түймесін 2 секунд басып тұрыңыз
Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Шамамен 30 минут күтіңіз, содан кейін құрылғыны қайта қосып көріңіз
Батарея заряды таусылды, шам қызыл болып жыпылықтайды	Массажерді «Батареяны зарядтау» тарауында көрсетілгендей зарядтаңыз

Массаждың қарқындылығы өте әлсіз

Мүмкін себеп	Шешім
Батарея заряды таусылды, шам қызыл болып жыпылықтайды	Массажерді «Батареяны зарядтау» тарауында көрсетілгендей зарядтаңыз

Құрылғы зарядталмайды, шам жыпылықтамайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Зақымдалған USB Type-C сымы	USB Type-C сымын ауыстырыңыз жұмыс істейді

Мүмкін себеп	Шешім
Ноутбук немесе компьютер немесе қуат банкі қосылмаған	Құрылғыны компьютердің USB портынан, қуат банкінен немесе ноутбуктен зарядтау үшін оларды қосу керек
Қуат бақт таусылды	Қуат банкін зарядтаңыз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселенізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмір жапсырмасының суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Қуат: USB Type-C — 5 В, 2 А
2. Қуаты: 10 Вт
3. Батарея: Li-Ion 7,4 В, 2 А*сағ (14,8 Вт*сағ)
4. Электр тогының соғуынан қорғау класы: III
5. Массаж түрі: роликті
6. Автоматты өшіру: 10 минуттан кейін
7. Зарядтау уақыты: 3,5–4 сағ
8. Жұмыс уақыты: 75 мин
9. USB Type-C сымының ұзындығы: 1 м
10. Құрылғының өлшемі: 1320 × 168 × 173 мм
11. Қаптама мөлшері: 250 × 175 × 170 мм
12. Таза салмағы: 1,2 кг
13. Жалпы салмағы: 1,5 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған:



Өндіруші: Нинбо Июэ Хэлс Тэк Ко., Лтд. Рум 711, №282, №288 Чэнбо Стрит, №668 Лиоань Норс Роуд, Хайшу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ак техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Массажердің ішіне, басқару панеліне, USB Type-C сымына арналған қосқышқа және USB Type-C сымына сұйықтықтардың, ұнтақтардың және бөгде заттардың түсуіне байланысты массажердің істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Агрессивті жуғыш заттармен тазалау салдарынан құрылғының зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. USB Type-C сымын немесе қуат сымының қосқышын алу арқылы құрылғыны көтермеңіз. Қуат көзінен ажыратылған кезде USB Type-C сымын тартпаңыз.
6. USB Type-C сымы немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз-оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде құрылғының жұмысын бақылаңыз.
9. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
10. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.

11. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
12. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
13. Сұйықтықтарды, ұнтақтарды және бөгде заттарды массажердің ішіне, басқару тақтасына, USB Type-C сымының ұясына және USB Type-C сымына кіргізбеңіз.
14. Егер USB Type-C сымы зақымдалған болса, оны арнайы USB Type-C сымымен немесе өндірушіден немесе қызмет көрсетуден алынған жиынтықпен ауыстыру керек.
15. Құрылғыны жылу мен оттан алыс ұстаңыз.
16. Зарядталғаннан кейін сымды алдымен қуат көзінен, содан кейін құрылғыдан ажыратыңыз.

IM-3





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»

В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы ендіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»

Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru